



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ранорасширитель спинальный для задних доступов
Bookwalter Posterior Spinal Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021

✓ ISO 9001:2015

✓ EN ISO 7153-1:2016


✓ cGMP Approved

✓ SCCI Registered since 2023

✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron

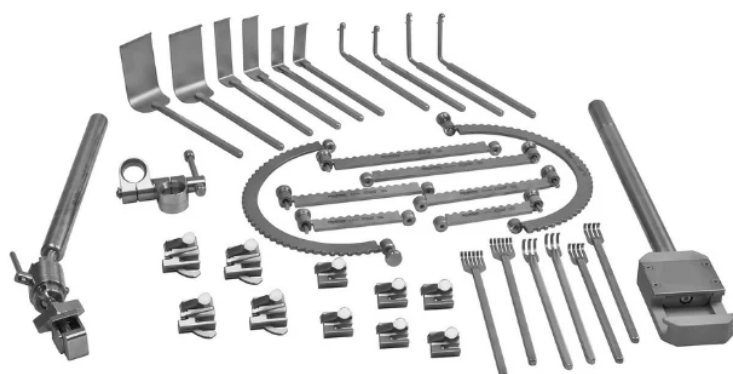

Ранорасширитель спинальный для задних доступов Bookwalter Posterior Spinal Retractor

SKU RM-BPSR-1

\$2,399 USD

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Стойка (Field Post)	12" (30.5 cm)
1	Зажим для стойки (Post Coupler)	Стандартный
1	Горизонтальная штанга	Диаметр 1" (2.5 cm)
6	Стандартные кремальеры	Без наклона
4	Наклонные кремальеры	Многопозиционные
1	Полукруглый сегмент рамы	Диаметр 8½" (21.6 cm)
1	Прямой сегмент рамы	4" (10.2 cm)
1	Прямой сегмент рамы	6" (15.2 cm)
1	Прямой сегмент рамы	8" (20.3 cm)
2	Лопатки Meyering	2⅓" × 2⅓" (1.7 × 5.9 cm)
2	Лопатки Meyering	1" × 3⅓" (2.5 × 8.5 cm)
2	Лопатки Meyering	2" × 3¾" (5.1 × 9.5 cm)
2	Крючки Scoville	Малые
2	Крючки Scoville	Большие

КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
2	Крючки 3-зубчатые	Ширина $\frac{2}{3}$ " x Глубина $\frac{3}{4}$ " (1.7 x 1.9 cm)
2	Крючки 4-зубчатые	Ширина $\frac{3}{4}$ " x Глубина $\frac{1}{2}$ " (1.9 x 0.8 cm)
2	Крючки 6-зубчатые	Ширина 1" x Глубина $\frac{1}{2}$ " (2.5 x 0.8 cm)
1	Стерилизационный контейнер	Защитный кейс

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Bookwalter Posterior Spinal Retractor — это самодержасьая система с креплением к операционному столу, предназначенная для обеспечения стабильной экспозиции операционного поля без участия рук ассистента при задних доступах к шейному, грудному и поясничному отделам позвоночника. Система монтируется на рельс стола с помощью стойки 12" (30.5 cm), стандартного зажима и горизонтальной штанги диаметром 1" (2.5 cm).

Рабочая рама имеет модульную конструкцию. Полукруглая секция 8½" (21.6 cm) комбинируется с прямыми сегментами 4", 6" и 8", что позволяет собрать раму, соответствующую длине и ширине разреза. Шесть стандартных и четыре многопозиционных наклонных кремальер надежно фиксируют лопатки на раме, позволяя независимо регулировать угол наклона и глубину ретракции.

Входящий в комплект набор инструментов охватывает широкий спектр манипуляций: лопатки Meyerding размеров $\frac{2}{3}$ " x 2½", 1" x 3½" и 2" x 3¾", малые и большие крючки Scoville, а также 3-, 4- и 6-зубчатые крючки типа «rake». Все компоненты изготовлены из немагнитной хирургической нержавеющей стали и поставляются в специализированном стерилизационном контейнере.

Bookwalter Posterior Spinal Retractor поставляется нестерильным, является изделием многоразового использования и полностью пригоден для автоклавирования. Перед использованием инструмент должен быть очищен и простерилизован в соответствии с утвержденными протоколами медицинского учреждения. Retractor Maker производит и поставляет данный набор напрямую из Сиалкота, Пакистан.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest