



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Bookwalter StrongArm Basic General Retractor System

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

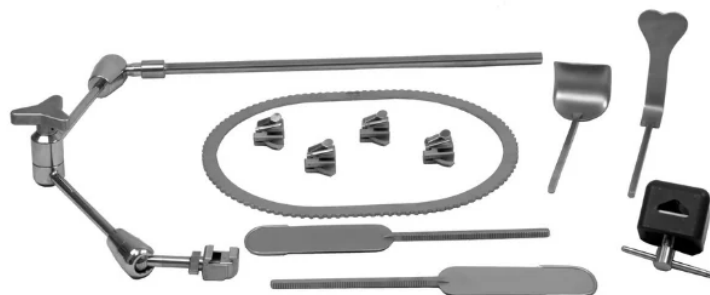

Bookwalter StrongArm Basic General Retractor System

SKU RM-BSABGRS-1

\$1,499 USD

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	StrongArm PLUS Holder (Oberseitenmontage)	Höhenverstellbar / Artikuliert
1	Ovaler Ring, Medium	10½" × 14½" (26.7 × 36.8 cm)
1	Hochleistungs-Schienenklemme	Kompatibel mit OP-Tischschienen
4	Kippratschen-Mechanismus	Winkelverstellbar
1	Balfour-Valve	2⅝" × 3" (6.7 × 7.6 cm)
1	Harrington-Valve	1" × 5⅝" × 2½" (2.5 × 14.3 × 6.4 cm)
2	Biegsame Valven	2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)
1	Sterilisationsbox	Schutzbehälter

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Bookwalter StrongArm Basic General Retractor System ist ein selbsthaltendes Retraktionssystem, das auf dem StrongArm PLUS Holder and Positioner montiert wird. Der Halter wird am Operationstisch befestigt und fixiert den Retraktorrahmen, was eine stabile, freihändige chirurgische Exposition bei offenen allgemeinchirurgischen Eingriffen ermöglicht.

Das Montagesystem besteht aus einem höhenverstellbaren, artikulierten StrongArm PLUS Holder zur Oberseitenmontage zusammen mit einer Hochleistungs-Schienenklemme, die mit der Tischschiene kompatibel ist. Der Halter trägt einen mittleren ovalen Ring mit den Maßen 10½" × 14½" (26.7 × 36.8 cm), der über der

Inzision positioniert und in der erforderlichen Arbeitshöhe und im gewünschten Winkel arretiert wird.

Vier winkelverstellbare Kippratschen-Mechanismen werden am Ring festgeklemmt und halten jede Valve in der gewählten Tiefe und Neigung. Die Basiskonfiguration der Valven umfasst eine Balfour-Valve in $2\frac{5}{8}'' \times 3''$ (6.7×7.6 cm), eine Harrington-Valve in $1'' \times 5\frac{5}{8}'' \times 2\frac{1}{2}''$ ($2.5 \times 14.3 \times 6.4$ cm) und zwei biegsame Valven in $2'' \times 6''$ (5.1×15.2 cm).

Alle Komponenten sind aus unmagnetischem, chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) gefertigt. Das Bookwalter StrongArm Basic General Retractor System ist fabrikneu, wiederverwendbar und voll autoklavierbar. Es wird unsteril geliefert und muss vor dem Gebrauch gemäß den validierten Verfahren der Gesundheitseinrichtung gereinigt und sterilisiert werden. Das Bookwalter StrongArm Basic General Retractor System wird in einer Sterilisationsbox geliefert, die die Komponenten schützt und organisiert. Retractor Maker fertigt das System in Sialkot, Pakistan, und liefert es direkt an Krankenhäuser, Chirurgen und Händler, bei einer Mindestbestellmenge von einem kompletten Set.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest