



# RETRACTOR MAKER

## БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Система ранорасширителя Bookwalter StrongArm  
Basic General Retractor System

**CERTIFIED & APPROVED**

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron

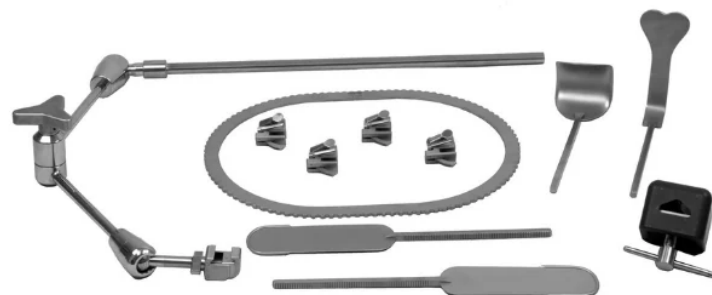

## Система ранорасширителя Bookwalter StrongArm Basic General Retractor System

**SKU** RM-BSABGRS-1

**\$1,499 USD**

### СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

| КОЛИЧЕСТВО | КОМПОНЕНТ                                  | РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ                      |
|------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1          | Верхний кронштейн-держатель StrongArm PLUS | Регулируемый по высоте / шарнирный      |
| 1          | Кольцо овальное, среднее                   | 10½" × 14½" (26.7 × 36.8 cm)            |
| 1          | Усиленный зажим на рельс                   | Совместим с рельсом операционного стола |
| 4          | Поворотный храповой механизм               | Многопозиционный                        |
| 1          | Лопатка Balfour                            | 2⅝" × 3" (6.7 × 7.6 cm)                 |
| 1          | Лопатка Harrington                         | 1" × 5⅝" × 2½" (2.5 × 14.3 × 6.4 cm)    |
| 2          | Гибкие лопатки (Malleable)                 | 2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)                 |
| 1          | Стерилизационный короб                     | Защитный кейс                           |

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Система ранорасширителя Bookwalter StrongArm Basic General Retractor System представляет собой самодержащуюся систему, устанавливаемую на держатель-позиционер StrongArm PLUS. Держатель крепится к операционному столу и фиксирует раму ранорасширителя, обеспечивая стабильную экспозицию хирургического поля без участия рук при открытых общехирургических вмешательствах.

Система крепления состоит из регулируемого по высоте шарнирного верхнего кронштейна StrongArm PLUS в сочетании с усиленным зажимом, совместимым с рельсом стола. Держатель несет среднее

овальное кольцо размером  $10\frac{1}{2}'' \times 14\frac{1}{2}''$  (26.7 × 36.8 cm), которое позиционируется над разрезом и фиксируется на необходимой рабочей высоте и под нужным углом.

Четыре многопозиционных поворотных храповых механизма крепятся к кольцу и удерживают каждую лопатку на выбранной глубине и под заданным наклоном. Базовый набор лопаток включает одну лопатку Balfour  $2\frac{5}{8}'' \times 3''$  (6.7 × 7.6 cm), одну лопатку Harrington  $1'' \times 5\frac{5}{8}'' \times 2\frac{1}{2}''$  (2.5 × 14.3 × 6.4 cm) и две гибкие (malleable) лопатки  $2'' \times 6''$  (5.1 × 15.2 cm).

Все компоненты изготовлены из немагнитной хирургической нержавеющей стали. Система Bookwalter StrongArm Basic General Retractor System является абсолютно новой, многоразовой и полностью автоклавируемой; поставляется нестерильной — перед использованием ее необходимо очистить и стерилизовать в соответствии с утвержденными протоколами медицинского учреждения. Система поставляется в стерилизационном коробе, который защищает и организует компоненты. Компания Retractor Maker производит систему в Сиалкоте (Пакистан) и поставляет ее напрямую в больницы, хирургам и дистрибьюторам с минимальным объемом заказа в один полный комплект.



## БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

### КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

**[info@retractormaker.com](mailto:info@retractormaker.com)**

WhatsApp

**+92 327 8345101**

Веб-сайты

**[retractormaker.com](http://retractormaker.com)**  
**[retractormanufacturer.com](http://retractormanufacturer.com)**

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

### ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest