



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Sistema Separador de Urología Bookwalter

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

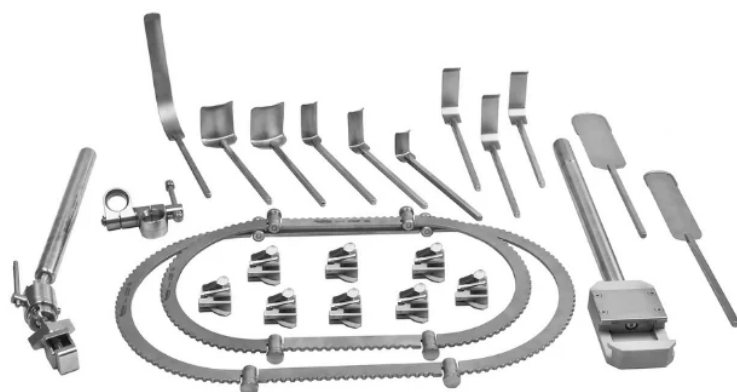

Sistema Separador de Urología Bookwalter

SKU RM-BURS-1

\$2,399 USD

LISTA DE COMPONENTES

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Poste de Campo	12" (30.5 cm)
1	Acoplador de Poste	Estándar
1	Barra Flexible Horizontal	1" de diámetro (2.5 cm)
8	Mecanismos de Cremallera Basculantes	Multi-ángulo
1	Aro Segmentado	10½" × 19" (26.7 × 48.3 cm)
1	Aro Segmentado	8½" × 14" (21.6 × 35.6 cm)
1	Valva Maleable	2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)
1	Valva Maleable	1½" × 6" (3.8 × 15.2 cm)
2	Valvas Kelly	1" × 2½" (2.5 × 6.4 cm)
1	Valva Kelly	1" × 1½" (2.5 × 3.8 cm)
2	Valvas Kelly	2" × 2½" (5.1 × 6.4 cm)
3	Valvas Vaginales Laterales	1" × 3" (2.5 × 7.6 cm)
1	Valva Renal Wylie	1" × 7" (2.5 × 17.8 cm)
1	Caja de Esterilización	Estuche protector

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El sistema separador de urología Bookwalter es un conjunto de separación autoestática montado en mesa, diseñado para proporcionar una exposición estable y manos libres durante abordajes abdominales y de flanco a los riñones, uréteres, vejiga y estructuras urológicas retroperitoneales. El sistema separador de urología Bookwalter se acopla a la mesa de operaciones con un poste de campo de 12" (30.5 cm), un acoplador de poste estándar y una barra flexible horizontal de 1" (2.5 cm) de diámetro.

Se suministran dos aros segmentados — 10½" × 19" (26.7 × 48.3 cm) y 8½" × 14" (21.6 × 35.6 cm) — para que el marco pueda adaptarse a la incisión y al paciente. Ocho mecanismos de cremallera basculantes de ángulos múltiples fijan las valvas al aro y permiten ajustar de forma independiente la profundidad de separación y el ángulo de la valva.

El instrumental de separación cubre exposiciones profundas y superficiales: valvas maleables de 2" × 6" y 1½" × 6", valvas Kelly en tamaños de 1" × 2½", 1" × 1½" y 2" × 2½", tres valvas vaginales laterales de 1" × 3" y una valva renal Wylie de 1" × 7". Todos los componentes están fabricados en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético).

El sistema separador de urología Bookwalter se suministra no estéril, es reutilizable y totalmente autoclavable, y debe limpiarse y esterilizarse de acuerdo con los procedimientos validados de su institución antes de su uso. Retractor Maker fabrica y suministra el conjunto directamente desde Sialkot, Pakistán.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest