



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

FK Retractor (Feyh-Kastenbauer)

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

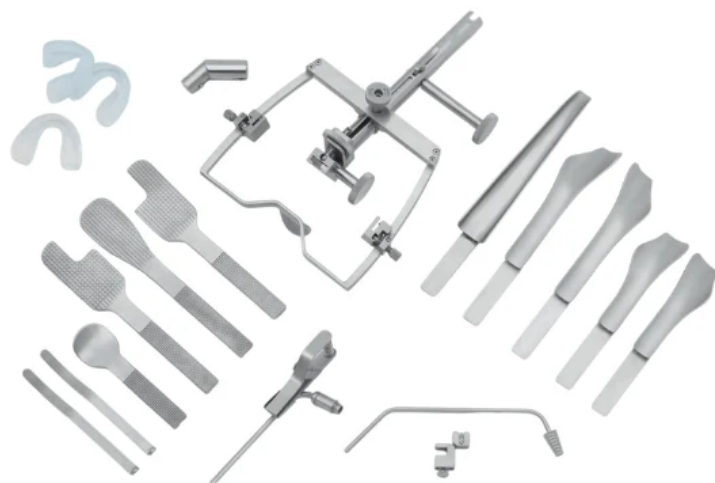

FK Retractor (Fe yh-Kastenbauer)

SKU RM-FK-1

\$4,999 USD

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛИЧЕСТ ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Базовая рама FK-WO TORS с адаптером	Основной узел несущей рамы
1	Адаптер для базовой рамы FK-WO TORS	Адаптер монтажного соединения
1	Адаптер для опухолевых щипцов или аспирационной трубки	Вспомогательный адаптер для крепления инструментов
1	Зажим для света	Латеральное соединение кабеля
2	Щечные ретракторы	Изогнутый профиль
1	Трубка для аспирации дыма	4.0 × 170 mm
10 pcs	Протектор для зубов	Без латекса, неавтоклавируемый
1	Нижнечелюстной клинок	11 cm
1	Гортанный клинок	17 cm, вогнутый
1	Ротовой клинок (для языка)	Изогнутый
1	Ротовой клинок (для языка)	Изогнутый, открытый справа
1	Ротовой клинок (для языка)	Изогнутый, открытый слева
1	Клинок TORS по Weinstein-O'Malley	Стандартный профиль TORS

КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
2	Малый клинок TORS, левый	Компактная левосторонняя конфигурация
2	Малый клинок TORS, правый	Компактная правосторонняя конфигурация
1	Стерилизационный короб	Формованный лоток для набора FK-WO TORS

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

FK Retractor (Feyh-Kastenbauer) — это всемирно признанная трансоральная операционная платформа, спроектированная для обеспечения оптимальной визуализации и хирургического доступа к корню языка, гортаноглотке, надгортаннику и гортани. Оптимизированная для трансоральной роботизированной хирургии (TORS), а также эндоларингеальной лазерной микрохирургии, эта система создает расширенный, жесткий визуальный коридор, который вмещает роботизированные манипуляторы и микроскопическую визуализацию без обструкции тканями.

Построенный на базе базовой рамы FK-WO TORS, этот полный комплект FK Retractor (Feyh-Kastenbauer) включает специализированные монтажные адаптеры для захватывающих щипцов или аспирационных трубок, зажимы для световодов, изогнутые щечные ретракторы, выделенную трубку для отсоса дыма 4.0 × 170 mm и 10 безлатексных протекторов для зубов. Узел клинков обеспечивает непревзойденную клиническую гибкость, включая нижнечелюстной клинок 11 см, вогнутый гортанный клинок 17 см, стандартные и открытые сбоку изогнутые клинки для языка, а также двусторонние клинки Weinstein-O'Malley TORS.

Поставляемый в специальном сверхпрочном стерилизационном коробе, Retractor Maker производит FK Retractor (Feyh-Kastenbauer) из высококачественной биосовместимой нержавеющей стали и специальных сплавов, обеспечивая надежную стабильность и ориентированную на хирурга эргономику непосредственно для отделений оториноларингологии по всему миру.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest