



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Intraoral Pterigoideo Petri

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

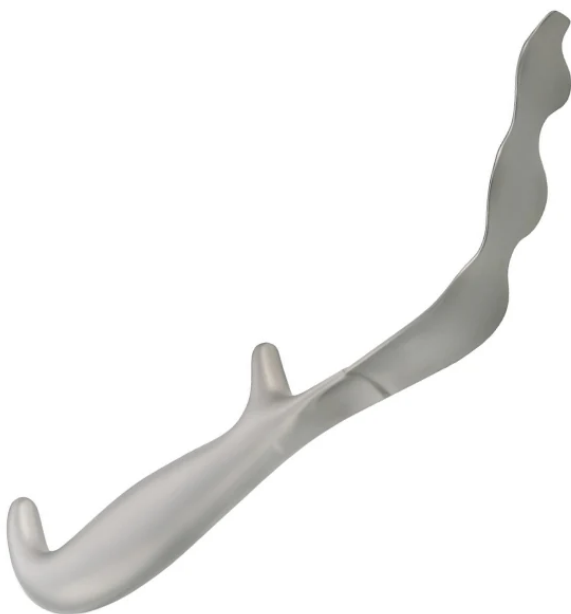

Separador Intraoral Pterigoideo Petri

SKU RM-PPIOR-23-1

\$79 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Petri Pterygoid Intra Oral Retractor	Longitud total de 23 cm, hoja pterigoidea de 25.5 mm de ancho	\$79
Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte individual	\$79

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Intraoral Pterigoideo Petri es un retractor quirúrgico esencial para cirugía oral, maxilofacial y ortognática, diseñado específicamente para proporcionar un desplazamiento de tejido blando seguro y no traumático, así como protección neurovascular durante las osteotomías Le Fort. Diseñado para deslizarse detrás de la tuberosidad maxilar, este instrumento protege la arteria maxilar interna y el plexo venoso pterigoideo de los osteótomos durante la disyunción pterigomaxilar.

Construido para soportar altas exigencias físicas manteniendo la facilidad de manejo, esta configuración del Separador Intraoral Pterigoideo Petri presenta una longitud total de 23 cm (9.0"). Fabricado a mano con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), el ancho de la hoja operativa incorpora un diseño expansivo de 25.5 mm optimizado para procedimientos de osteotomía Le Fort. Los bordes de la hoja, suavemente contorneados, envuelven la pared maxilar posterior de forma limpia, evitando laceraciones en los tejidos blandos, mientras que el mango ergonómico proporciona a los asistentes quirúrgicos un apalancamiento manual estable.

Forjado con un acabado satinado mate antirreflejante, Retractor Maker fabrica el Separador Intraoral Pterigoideo Petri para resistir ciclos repetitivos de esterilización hospitalaria, proporcionando a los centros de cirugía maxilofacial, ortognática y craneofacial de todo el mundo una resistencia excepcional a la corrosión, rigidez estructural y durabilidad completa en autoclave.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest