



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ранорасширитель Denis-Browne Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron

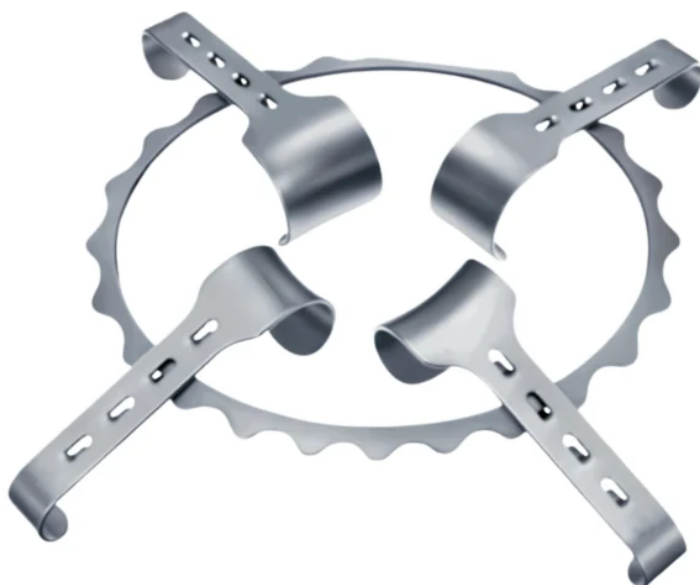

Ранорасширите ль Denis-Browne Retractor

SKU RM-DBR-SET-1

\$499 USD

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Самоудерживающаяся кольцевая рама	Рама 175 mm × 150 mm, обеспечивающая обзор во всех направлениях
2 (1 пара)	Сменные зеркала для поверхностных тканей	Изогнутые кончики 40 mm × 30 mm, идеальны для деликатных слоев
2 (1 пара)	Сменные зеркала для глубоких тканей	Изогнутые кончики 40 mm × 40 mm, оптимизированы для объемных тканей
4	Быстросъемные штифтовые фиксаторы	Механизм фиксации скольжением для снижения нагрузки на пальцы
1	Защитная упаковка / Коробка	Стандартная транспортная упаковка

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ранорасширитель Denis-Browne Retractor — это признанная во всем мире самоудерживающаяся хирургическая система, разработанная специально для обеспечения широкого, 360-градусного радиального разведения мягких тканей и краев раны во время педиатрических, абдоминальных и тазовых операций. Благодаря кольцевой раме инструмент позволяет хирургу располагать несколько сменных зеркал под любым вектором вдоль разреза, устраняя усталость рук ассистента и сохраняя открытый статичный визуальный коридор.

Этот полный комплект Denis-Browne Retractor (\$499), созданный в соответствии с клиническими стандартами, включает самоудерживающуюся кольцевую базу с конструкцией 175 mm × 150 mm, гарантирующую видимость во всех направлениях в глубоких операционных полях. Изготовленная

вручную из высококачественной немецкой нержавеющей стали операционного класса, система комплектуется набором зеркал: двумя сменными зеркалами для поверхностных тканей (изогнутые кончики 40 mm × 30 mm, идеальны для деликатных слоев) и двумя сменными зеркалами для глубоких тканей (изогнутые кончики 40 mm × 40 mm, оптимизированы для объемных тканей). Четыре быстросъемных штифтовых фиксатора мгновенно закрепляют зеркала, снижая нагрузку на пальцы и ускоряя интраоперационную регулировку.

Retractor Maker производит Denis-Browne Retractor с антибликовым сатиновым матовым покрытием, способным выдерживать многократные циклы автоклавирования. Это обеспечивает детским хирургическим отделениям, урологическим операционным и центрам общей лапаротомии по всему миру исключительную долговечность, коррозионную стойкость и надежность.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest