



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Bookwalter 肥満外科用開創器システム

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

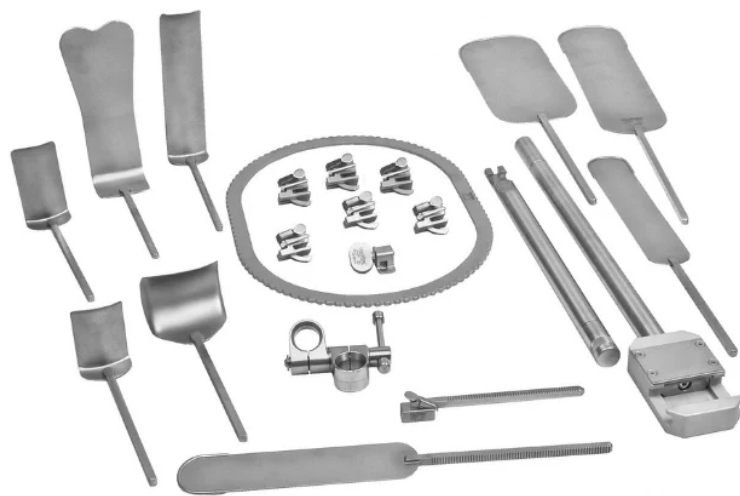

Bookwalter 肥満外科用開創器システム

SKU RM-BBRS-1

\$1,899 USD

コンポーネントリスト

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
1	Field Post	18" (45.7 cm)
1	Horizontal Bar	標準
1	Post Coupler	標準
6	Tilt Ratchet Mechanism	多角式
1	Ratchet Extender	標準エクステンション
1	Twist Ratchet	可変角
1	Ring, Oval	ミディアム
1	Kelly Blade	2" × 3" (5.1 × 7.6 cm)
1	Kelly Blade	2" × 4" (5.1 × 10.2 cm)
1	Kelly Blade	2" × 8" (5.1 × 20.3 cm)
1	Balfour Blade	3½" × 2¾" (8.9 × 7.0 cm)
1	Malleable Blade	3" × 10" (7.6 × 25.4 cm)
1	Malleable Blade	2" × 8" (5.1 × 20.3 cm)
1	Malleable Blade	2" × 10" (5.1 × 25.4 cm)

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
1	Malleable Blade	4" × 8" (10.2 × 20.3 cm)
1	Harrington Blade	2½" × 8" × 3½" (6.4 × 20.3 × 8.9 cm)
1	Sterilization Box	保護用ケース

製品詳細

Bookwalter 肥満外科用開創器システムは、特殊な開創を必要とする開腹下の肥満外科手術において、安定したハンズフリーの術野展開を実現するために設計された手術台固定式自動開創器です。モジュール式のフレームワークは、延長フィールドポスト、水平サポートコンポーネント、調整可能なラチェット機構、およびオーバルリングを組み合わせ、術野周囲に強固な開創プラットフォームを構築します。

肥満外科用構成には、18-inch フィールドポスト、6個の多角チルトラチェット機構、ラチェットエクステンダー、可変角ツイストラチェット、およびミディウムオーバルリングが含まれます。また、さまざまな開創要件に対応するため、異なる寸法の Kelly、Balfour、マリアブル、Harrington 弁がセットに含まれています。

システム一式は、整理された保管と処理を可能にする専用の保護用滅菌ボックスに収納されています。本システムは非滅菌状態で提供され、再利用およびオートクレーブ滅菌が可能です。洗浄および滅菌は、使用前に医療施設の承認された手順に従って実施してください。

Retractor Maker は、Bookwalter 肥満外科用開創器システムを病院、販売代理店、およびその他のB2B顧客に直接提供しています。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest