



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ранорасширитель Bookwalter для хирургии кисти

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

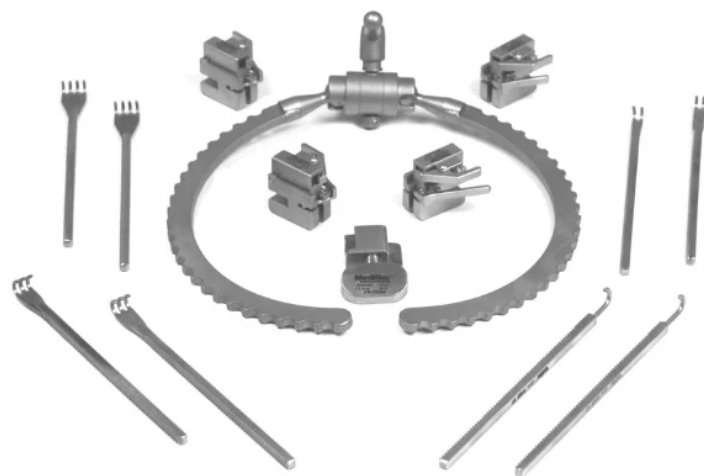

Ранорасширите ль Bookwalter для хирургии кисти

SKU RM-BHSRS-1

\$999 USD

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
2	Лопатка Mini-Bookwalter, однозубый крючок	Стандарт Mini — острый или тупой кончик
2	Лопатка Mini-Bookwalter, двухзубый крючок	Стандарт Mini — острый или тупой кончик
2	Лопатка Mini-Bookwalter, трехзубый крючок	Стандарт Mini — острый или тупой кончик
2	Лопатка Mini-Bookwalter, четырехзубый крючок	Стандарт Mini — острый или тупой кончик
1	Винтовой фиксатор Mini-Bookwalter	Стандарт Mini
4	Поворотный механизм фиксации Mini-Bookwalter	Стандарт Mini
1	Разъемное кольцо Mini-Bookwalter	7" (17.5 cm)
1	Стерилизационный короб	Защитный кейс

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ранорасширитель Bookwalter для хирургии кисти представляет собой компактную самоудерживающуюся систему, предназначенную для обеспечения стабильной фиксации тканей без участия рук во время деликатных хирургических вмешательств на кисти, запястье и верхних

конечностях. В основе набора лежит разъемное кольцо 7" (17.5 cm) Mini-Bookwalter, образующее рабочую раму вокруг операционного поля.

Четыре мини-поворотных фиксатора и один мини-винтовой фиксатор надежно крепят входящие в комплект лопатки к кольцу и позволяют независимо регулировать угол и силу натяжения каждого инструмента. Система Bookwalter для хирургии кисти включает одно-, двух-, трех- и четырехзубые лопатки-крючки Mini-Bookwalter с острыми или тупыми кончиками, что позволяет подобрать оптимальную конфигурацию для требуемой экспозиции. Держатель StrongArm для крепления к столу приобретается отдельно.

Все компоненты изготовлены из немагнитной хирургической нержавеющей стали и поставляются в специальном стерилизационном контейнере для организованного хранения и обработки. Система является многоразовой и полностью автоклавируемой.

Ранорасширитель Bookwalter для хирургии кисти поставляется нестерильным. Перед использованием его необходимо очистить и простерилизовать в соответствии с утвержденными процедурами медицинского учреждения. Retractor Maker, базирующаяся в Сиалкоте, Пакистан, производит и поставляет эту систему напрямую в больницы, хирургам и дистрибьюторам.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest