



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Bookwalter StrongArm 一般外科開腹レトラクターシステム

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron

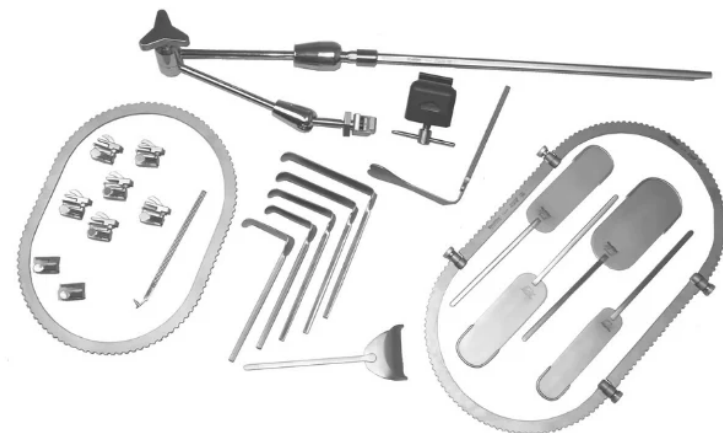

Bookwalter StrongArm 一般外 科開腹レトラクター システム

SKU RM-BSAGSRS-1

\$2,199 USD

コンポーネントリスト

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
1	トップマウント StrongArm PLUS ホルダー	高さ調節可能 / 多軸式
1	ヘビーデューティー・レールクランプ	手術台レール対応
2	ラチェット機構	標準 (非傾斜)
6	チルトラチェット機構	マルチアングル
1	セグメントリング	10½" × 14½" (26.7 × 36.8 cm)
1	セグメントリング	10½" × 19" (26.7 × 48.3 cm)
1	Balfour ブレード	2⅝" × 3" (6.7 × 7.6 cm)
2	Kelly ブレード	2" × 3" (5.1 × 7.6 cm)
1	Kelly ブレード	2" × 4" (5.1 × 10.2 cm)
1	Kelly ブレード	2" × 5" (5.1 × 12.7 cm)
1	Kelly ブレード	2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)
1	Harrington ブレード	1" × 5⅝" × 2½" (2.5 × 14.3 × 6.4 cm)
1	Gelpi ブレード	標準型
1	可塑性ブレード	3" × 6" (7.6 × 15.2 cm)

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
2	可塑性ブレード	2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)
1	可塑性ブレード	1½" × 6" (3.8 × 15.2 cm)
1	滅菌ケース	保護用ケース

製品詳細

Bookwalter StrongArm 一般外科開腹レトラクターシステムは、StrongArm PLUS ホルダーに取り付けられる自動固定式レトラクターシステムです。ホルダーを手術台に固定してレトラクターフレームを支えることで、開腹手術中に安定したハンズフリーの術野展開を可能にします。

マウントシステムは、高さ調節可能な多軸トップマウント式 StrongArm PLUS ホルダーと、手術台レールに対応したヘビーデューティー・レールクランプで構成されています。2種類のセグメントリング（10½" × 14½" (26.7 × 36.8 cm) および 10½" × 19" (26.7 × 48.3 cm)）が付属しており、切開の長さに合わせてフレームのサイズ調整や再構成が可能です。

2個の標準ラチェットと6個のマルチアングル・チルトラチェットにより、各ブレードを必要な深さと角度で保持できます。ブレードセットには、Balfour ブレード、4種類の長さ（3"、4"、5"、6"）の Kelly ブレード、Harrington ブレード、Gelpi ブレード、および3種類のサイズ（3" × 6"、2" × 6"、1½" × 6"）の可塑性ブレードが含まれており、広範な一般外科手術の術野展開に対応します。

すべてのコンポーネントは非磁性プレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）で製造されています。本システムは新品で再利用およびオートクレーブ滅菌が可能です。非滅菌状態で提供されるため、使用前に医療施設の承認された手順に従って洗浄・滅菌を行ってください。整理された保管と処理のために専用の滅菌ケースが付属しています。Retractor Maker はパキスタンのシアルコートで本システムを製造し、病院、外科医、代理店へ直接供給しています。最小注文数量は1セットからです。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest