



# RETRACTOR MAKER

## FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Sistema Separador de Cirugía Pélvica Bookwalter GYN  
Magrina

### CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021

✓ ISO 9001:2015


✓ EN ISO 7153-1:2016

✓ cGMP Approved

✓ SCCI Registered since 2023

✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

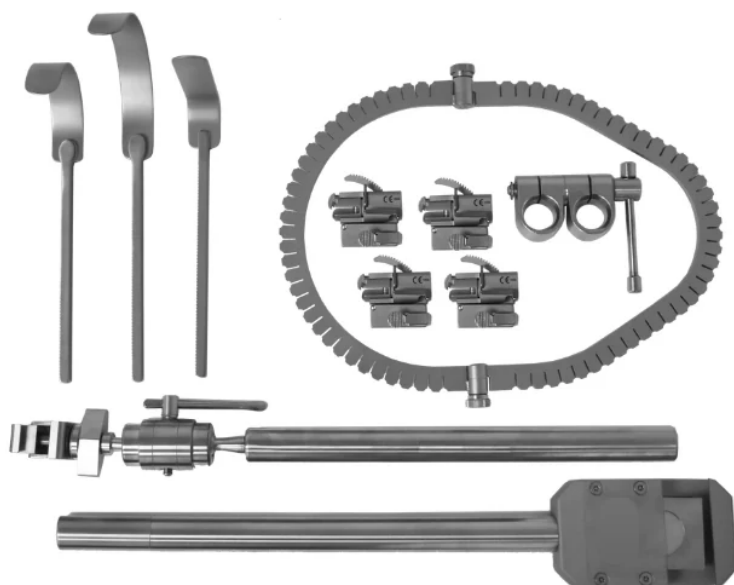

## Sistema Separador de Cirugía Pélvica Bookwalter GYN Magrina

**SKU** RM-BGMPRS-1

**\$1,499 USD**

### LISTA DE COMPONENTES

| CANTIDAD | COMPONENTE                         | DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN     |
|----------|------------------------------------|-------------------------------|
| 1        | Poste de campo                     | 12" (30 cm)                   |
| 1        | Acoplador de poste                 | Estándar                      |
| 1        | Barra flexible horizontal          | Multiarticulada estándar      |
| 1        | Aro perineal con muescas           | 9½" × 14½" (24.1 × 36.8 cm)   |
| 4        | Trinquete de inclinación giratorio | Estándar con retención de aro |
| 2        | Valvas laterales vaginales         | 1" × 3" (2.5 × 7.6 cm)        |
| 1        | Valva Deaver                       | 1" × 3½" (2.5 × 8.9 cm)       |
| 1        | Valva Deaver                       | 1" × 5" (2.5 × 12.7 cm)       |
| 1        | Valva posterior vaginal            | 1" × 4½" (2.5 × 11.4 cm)      |
| 1        | Caja de esterilización             | Estuche protector             |

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Sistema Separador de Cirugía Pélvica Bookwalter GYN Magrina es un separador autoestático montado en la mesa, diseñado para proporcionar una exposición estable y manos libres durante procedimientos quirúrgicos ginecológicos, vaginales y pélvicos. Su estructura modular combina un poste de campo, una barra flexible horizontal, un acoplador de poste, un aro perineal con muescas y mecanismos de trinquete de inclinación giratorios para soportar las valvas seleccionadas alrededor del campo operatorio.

El sistema está configurado con un aro perineal con muescas de 9½" x 14½" y cuatro trinquetes de inclinación giratorios con retención de aro. Las valvas incluidas (lateral vaginal, Deaver y posterior vaginal) proporcionan una variedad de configuraciones de valvas para los requisitos de exposición quirúrgica.

El sistema completo se suministra en una caja de esterilización protectora dedicada para un almacenamiento y procesamiento organizados. El Sistema Separador de Cirugía Pélvica Bookwalter GYN Magrina se suministra no estéril y está diseñado para ser reutilizable y autoclavable. La limpieza y esterilización deben realizarse de acuerdo con los procedimientos validados del centro sanitario antes de su uso.

Retractor Maker suministra el Sistema Separador de Cirugía Pélvica Bookwalter GYN Magrina directamente a hospitales, distribuidores y otros clientes B2B.



# GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

## CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

**[info@retractor maker.com](mailto:info@retractor maker.com)**

WhatsApp

**+92 327 8345101**

Sitios web

**[retractor maker.com](http://retractor maker.com)**  
**[retractor manufacturer.com](http://retractor manufacturer.com)**

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

## SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest