



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur rachidien postérieur Bookwalter

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

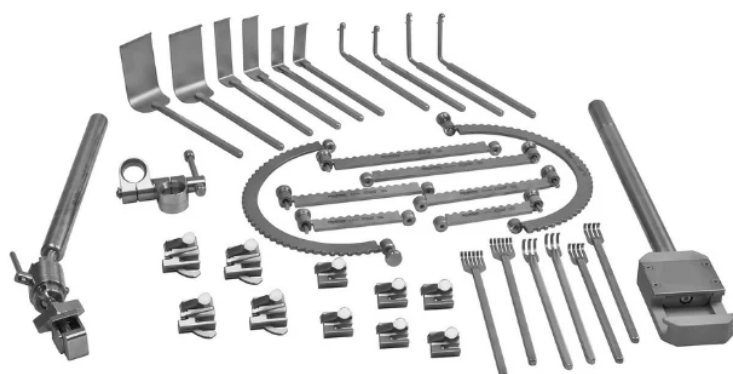

Écarteur rachidien postérieur Bookwalter

SKU RM-BPSR-1

\$2,399 USD

LISTE DES COMPOSANTS

QUANTITÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Mât de champ	12" (30.5 cm)
1	Raccord de mât	Standard
1	Barre horizontale	Diamètre de 1" (2.5 cm)
6	Crémaillères standard	Non inclinables
4	Mécanismes de crémaillère inclinables	Multi-angles
1	Segments d'anneau demi-circulaires	Diamètre de 8½" (21.6 cm)
1	Segment d'anneau droit	Diamètre de 4" (10.2 cm)
1	Segment d'anneau droit	Diamètre de 6" (15.2 cm)
1	Segment d'anneau droit	Diamètre de 8" (20.3 cm)
2	Valves Meyerding	⅔" × 2⅓" (1.7 × 5.9 cm)
2	Valves Meyerding	1" × 3⅓" (2.5 × 8.5 cm)
2	Valves Meyerding	2" × 3¾" (5.1 × 9.5 cm)
2	Crochets Scoville	Petit modèle
2	Crochets Scoville	Grand modèle

QUANTITÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
2	Râteaux à 3 griffes	Largeur $\frac{2}{3}$ " × Profondeur $\frac{3}{4}$ " (1.7 × 1.9 cm)
2	Râteaux à 4 griffes	Largeur $\frac{3}{4}$ " × Profondeur $\frac{1}{3}$ " (1.9 × 0.8 cm)
2	Râteaux à 6 griffes	Largeur 1" × Profondeur $\frac{1}{3}$ " (2.5 × 0.8 cm)
1	Boîte de stérilisation	Étui de protection

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur rachidien postérieur Bookwalter est un ensemble d'écarteurs autostatiques montés sur table, conçu pour fournir une exposition chirurgicale stable et mains libres lors des approches postérieures de la colonne cervicale, thoracique et lombaire. L'écarteur rachidien postérieur Bookwalter se monte sur la table d'opération à l'aide d'un mât de 12" (30.5 cm), d'un raccord de mât standard et d'une barre horizontale de 1" (2.5 cm) de diamètre.

Le cadre de travail est modulaire. Un segment d'anneau en demi-cercle de 8½" (21.6 cm) se combine avec des segments d'anneau droits de 4", 6" et 8" afin que le cadre puisse être assemblé pour correspondre à la longueur et à la largeur de l'incision. Six crémaillères standard non inclinables et quatre mécanismes de crémaillères inclinables multi-angles fixent les valves au cadre et permettent de régler l'angle de la valve et la profondeur de rétraction de manière indépendante.

Le matériel de rétraction inclus couvre une large gamme d'expositions : des valves Meyerding dans les tailles $\frac{2}{3}$ " × 2½", 1" × 3½" et 2" × 3¾", des petits et grands crochets Scoville, ainsi que des râteaux à 3, 4 et 6 griffes. Tous les composants sont fabriqués en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique).

L'écarteur rachidien postérieur Bookwalter est livré non stérile, il est réutilisable et entièrement autoclavable. Il doit être nettoyé et stérilisé selon les procédures validées de l'établissement de santé avant utilisation. Retractor Maker fabrique et fournit l'ensemble directement depuis Sialkot, au Pakistan.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest