



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Sistema de Separador Tubular

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

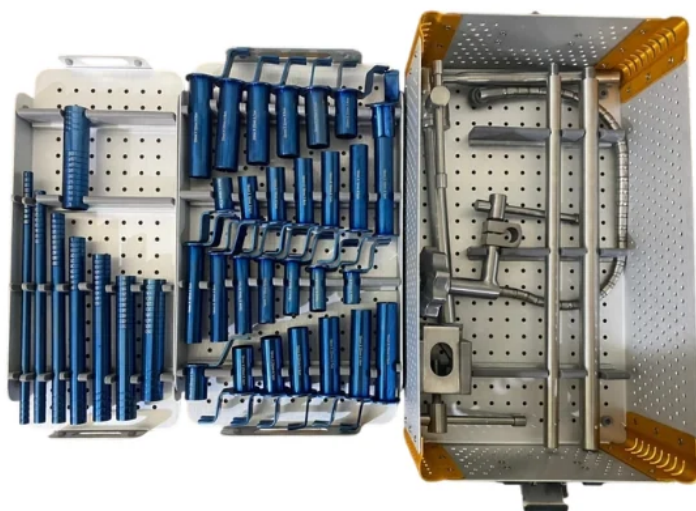

Sistema de Separador Tubular

SKU RM-TRS-MIS-1

\$2,199 USD

LISTA DE COMPONENTES

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diámetro 12-14 mm, longitud 30 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diámetro 12-14 mm, longitud 40 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diámetro 12-14 mm, longitud 50 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diámetro 12-14 mm, longitud 60 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diámetro 12-14 mm, longitud 70 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diámetro 12-14 mm, longitud 80 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diámetro 12-14 mm, longitud 90 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diámetro 14-16 mm, length 30 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diámetro 14-16 mm, longitud 40 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diámetro 14-16 mm, longitud 50 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diámetro 14-16 mm, longitud 60 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diámetro 14-16 mm, longitud 70 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diámetro 14-16 mm, longitud 80 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diámetro 14-16 mm, longitud 90 mm

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diámetro 16-18 mm, longitud 30 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diámetro 16-18 mm, longitud 40 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diámetro 16-18 mm, longitud 50 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diámetro 16-18 mm, longitud 60 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diámetro 16-18 mm, longitud 70 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diámetro 16-18 mm, longitud 80 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diámetro 16-18 mm, longitud 90 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diámetro 18-20 mm, longitud 30 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diámetro 18-20 mm, longitud 40 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diámetro 18-20 mm, longitud 50 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diámetro 18-20 mm, longitud 60 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diámetro 18-20 mm, longitud 70 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diámetro 18-20 mm, longitud 80 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diámetro 18-20 mm, longitud 90 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diámetro 27-29 mm, longitud 30 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diámetro 27-29 mm, longitud 40 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diámetro 27-29 mm, longitud 50 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diámetro 27-29 mm, longitud 60 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diámetro 27-29 mm, longitud 70 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diámetro 27-29 mm, longitud 80 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diámetro 27-29 mm, longitud 90 mm
1	MIS Tubular Retractor Dilator	Diámetro 6 mm
1	MIS Tubular Retractor Dilator	Diámetro 8 mm
1	MIS Tubular Retractor Dilator	Diámetro 10 mm
1	MIS Tubular Retractor Dilator	Diámetro 12 mm
1	MIS Tubular Retractor Dilator	Diámetro 14 mm

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	MIS Tubular Retractor Dilator	Diámetro 16 mm
1	MIS Tubular Retractor Dilator	Diámetro 18 mm
1	Tubular Flexible Arm	Brazo de sujeción articulado multiteje
1	Table Clamp Set	Montaje para riel de mesa de operaciones
1	Sterilization Box	Estuche ajustado para reprocesamiento organizado

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Sistema de Separador Tubular es una plataforma esencial de instrumentos quirúrgicos mínimamente invasivos diseñada para establecer corredores de acceso con preservación muscular durante intervenciones espinales complejas. Al facilitar la dilatación tisular secuencial en lugar de la desprendimiento traumático del músculo, este sistema minimiza drásticamente la disrupción de tejidos, reduce el dolor posoperatorio y acorta los tiempos de recuperación del paciente.

Diseñado para ofrecer versatilidad procedimental tanto en segmentos cervicales como lumbares, el Sistema de Separador Tubular cuenta con un complemento extenso de puertos tubulares especializados que cubren diámetros de 12-14 mm, 14-16 mm, 16-18 mm, 18-20 mm y 27-29 mm en longitudes de 30 mm a 90 mm. El juego incluye dilatadores secuenciales de 6 mm a 18 mm, una pinza rígida para riel de mesa y un brazo articulado flexible que se ancla de forma segura a la mesa de operaciones para bloquear el tubo de trabajo rígidamente sobre el espacio discal objetivo.

Mecanizado con precisión a partir de Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico no magnético con un acabado satinado sin reflejos, Retractor Maker suministra el Sistema de Separador Tubular completo no estéril y totalmente autoclavable dentro de una caja de esterilización dedicada, garantizando una gestión óptima de la esterilidad y una rotación organizada en el quirófano.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest