



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador de Heridas Logan

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

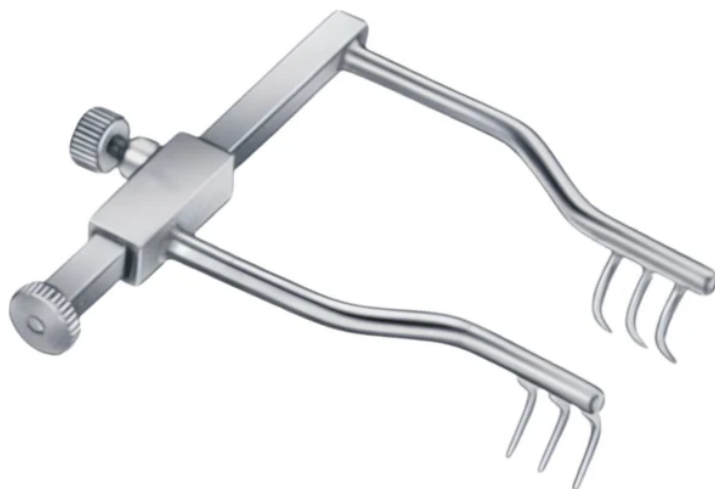

Separador de Heridas Logan

SKU RM-LWS-4CM-1

\$199 USD

LISTA DE COMPONENTES

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Bastidor guía inferior con trinquete	Chasis base principal que sirve como guía para expandir los bordes del tejido
1	Soporte de brazo deslizante	Componente de soporte móvil que se ajusta horizontalmente a lo largo del riel
2	Mecanismos de ajuste de tornillo	Engranajes de tornillo de bloqueo de precisión para desplazar y asegurar los brazos en su posición
2	Puntas de separación dentadas	Extremos de mandíbula antideslizantes con dientes 3 × 3 afilados curvados hacia afuera
1	Caja/Almacenamiento protector	Embalaje estándar de transporte

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador de Heridas Logan es un separador quirúrgico autorretentivo compacto y especializado, diseñado específicamente para proporcionar una exposición segura y manos libres de los tejidos blandos y los bordes de la herida durante cirugías oftálmicas, plásticas faciales y de microrreconstrucción. Diseñado con una barra de trinquete horizontal ultracorta, este instrumento permite a los cirujanos separar incisiones superficiales con microprecisión calibrada, eliminando la necesidad de asistencia manual mientras mantiene un campo de visión sin obstrucciones bajo lupas quirúrgicas y microscopios.

Construida específicamente para corredores anatómicos delicados, esta configuración del Separador de Heridas Logan presenta una longitud total de 4 cm (1 ½ pulgadas, \$199). Fabricada artesanalmente con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), la configuración del extremo de trabajo incorpora mandíbulas antideslizantes armadas con dientes 3 × 3 afilados curvados hacia afuera, diseñados

específicamente para anclarse de forma segura en aponeurosis densas, periostio y bordes musculares sin deslizarse. El soporte del brazo deslizante se desplaza suavemente a lo largo del bastidor guía inferior y se bloquea rígidamente mediante dos mecanismos de ajuste de tornillo de precisión para eliminar la fatiga del usuario.

Forjado con un acabado satinado mate antirreflejante, Retractor Maker fabrica el Separador de Heridas Logan para resistir ciclos repetitivos de autoclave hospitalario, proporcionando a los centros de cirugía oftálmica, clínicas de cirugía plástica y unidades de microcirugía craneal en todo el mundo una rigidez estructural excepcional, resistencia a la corrosión y durabilidad completa en autoclave.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest