



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ранорасширитель для митрального клапана

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

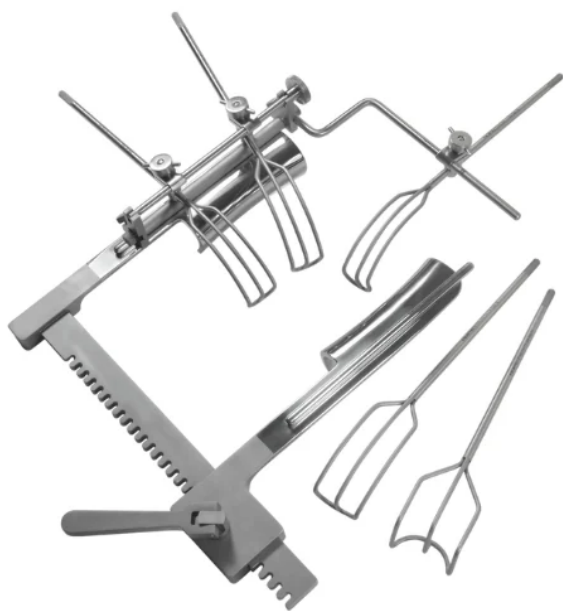

Ранорасширите ль для митрального клапана

SKU RM-MVR-1

\$899 USD

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛИЧЕСТ ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Основной кронштейн	Основной несущий компонент системы расширителя
1	Расширитель грудины Cooley	Компонент для ретракции грудины
1	Боковая штанга	Обеспечивает дополнительную опору и возможность позиционирования
3	Универсальный зажим	Соединяет и фиксирует совместимые компоненты внутри системы
1	Трикуспидальная лопатка	Вариант лопатки для хирургического доступа к сердцу
1	Большая лопатка	Увеличенный вариант лопатки для ретракции тканей
3	Малая лопатка	Уменьшенные варианты лопаток для ретракции тканей
1	Стерилизационный короб	Организует и защищает полный комплект при хранении и обработке

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ранорасширитель для митрального клапана представляет собой специализированную систему для кардиохирургии, предназначенную для обеспечения четкой и стабильной экспозиции левого предсердия и внутрисердечных структур при реконструкции клапанов. Устанавливаемый непосредственно на ретрактор грудины Cooley или стернотомический каркас, этот узел приподнимает и изолирует ткани предсердия, обеспечивая хирургу беспрепятственный обзор фиброзного кольца клапана.

Система полностью укомплектована для интраоперационного позиционирования и включает усиленный расширитель грудины Cooley, основную опорную скобу, регулируемую боковую штангу и три универсальных зажима. Набор лопаток включает специализированную лопатку для трикуспидального клапана, одну большую и три малые лопатки, предназначенные для бережной ретракции краев предсердия и тканей межпредсердной перегородки без риска разрывов.

Изготовленный из хирургической нержавеющей стали с антибликовым сатинированным покрытием, Retractor Maker предоставляет полный набор для митрального клапана в нестерильном виде. Весь комплект полностью пригоден для автоклавирования и поставляется в прочном стерилизационном коробе, обеспечивая больницам стабильное качество и надежность при операциях с использованием искусственного кровообращения.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest