



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de chirurgie périnéale Bookwalter

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron

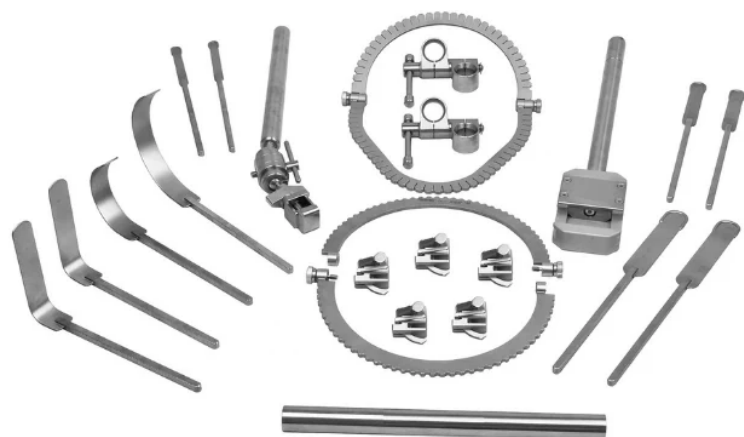

Écarteur de chirurgie périnéale Bookwalter

SKU RM-BPRS-1

\$2,199 USD

LISTE DES COMPOSANTS

QUANTITÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Montant de champ	12" (30 cm)
2	Raccords de montant	Standard
1	Barre horizontale	Standard
1	Barre d'extension verticale	12" (30 cm)
5	Mécanismes à crémaillère inclinables	Multi-angles standard
1	Segments en demi-cercle	Diamètre 8½" (21.6 cm)
1	Anneau périnéal cranté	9½" × 14½" (24.1 × 36.8 cm)
2	Valves vaginales postérieures	1" × 4½" (2.5 × 11.4 cm)
1	Valve Deaver	1" × 5" (2.5 × 12.7 cm)
1	Valve Deaver	1" × 3½" (2.5 × 8.9 cm)
2	Valves malléables	½" × 4" (1.3 × 10.2 cm)
2	Valves malléables	¾" × 4" (1.9 × 10.2 cm)
2	Valves malléables	1" × 5" (2.5 × 12.7 cm)
1	Boîte de stérilisation	Boîtier de protection

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur de chirurgie périnéale Bookwalter est un système d'écartement autostatique fixé à la table, conçu pour fournir une exposition stable et mains libres pendant les interventions chirurgicales périnéales, colorectales, gynécologiques et pelviennes. Son cadre de montage se compose d'un montant de champ de 12" (30 cm), de deux raccords de montant, d'une barre horizontale et d'une barre d'extension verticale de 12" (30 cm), offrant de multiples options de montage et de positionnement par rapport à la table d'opération.

Le cadre de travail est formé par un anneau périnéal cranté de 9½" × 14½" (24.1 × 36.8 cm), soutenu par un segment en demi-cercle de 8½" (21.6 cm). Cinq mécanismes à crémaillère inclinables multi-angles se fixent à l'anneau et permettent d'ajuster l'angle et la profondeur de chaque valve indépendamment selon l'évolution des besoins d'exposition.

La configuration des valves incluse couvre une large gamme de besoins : deux valves vaginales postérieures, deux valves Deaver de 5" et 3½" de long, et six valves malléables de tailles ½" × 4", ¾" × 4" et 1" × 5". Tous les composants sont fabriqués en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique).

L'écarteur de chirurgie périnéale Bookwalter est fourni non stérile ; il est réutilisable et entièrement autoclavable. L'écarteur Bookwalter doit être nettoyé et stérilisé selon les procédures validées de l'établissement de santé avant utilisation. Retractor Maker fabrique ce système à Sialkot, au Pakistan.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest