



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Система ретракции Valve XS Retractor System

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron

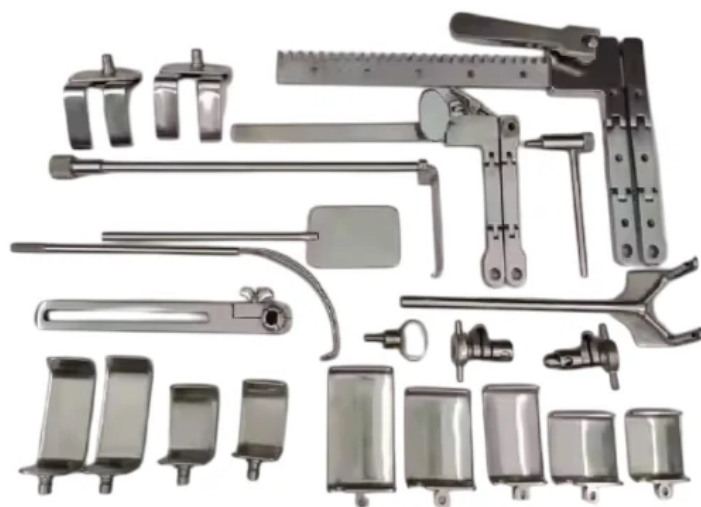

Система ретракции Valve XS Retractor System

SKU RM-VXRS-1

\$999 USD

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Система ретракции Valve XS для бокового доступа	Двухшарнирная конфигурация
1	Лопатка с шариковым фиксатором	53 × 36 mm
1	Аксессуар для бокового реберного ретрактора (пластичный)	60 × 35 mm
1	Соединительный зажим Valve XS тип В	Структурный зажим
1	Ретракционный шток	9" (230 mm)
1	Ретрактор для MICS АКШ	Специализированный компонент
1	Инструмент для установки лопатки лифтинга предсердия	Специальный инструмент для аппликации
1	Лопатка (зеркало)	30 × 35 mm
1	Лопатка (зеркало)	40 × 35 mm
1	Лопатка (зеркало)	50 × 35 mm
1	Лопатка (зеркало)	60 × 35 mm
1	Лопатка (зеркало)	70 × 35 mm

КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Стерилизационный бокс	Контейнер для хранения

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Система Valve XS Retractor System представляет собой передовую платформу для торакальной и кардиохирургической ретракции, разработанную специально для малоинвазивных операций на клапанах, выполняемых через малую боковую миниторакотомию. Благодаря использованию двухшарнирной сочлененной рамы расширителя, эта система создает широкий операционный коридор, сводя к минимуму межреберное разведение и предотвращая переломы ребер.

Разработанная для прецизионных коронарных и клапанных вмешательств, система Valve XS Retractor System включает в себя двухшарнирную раму для бокового доступа, соединительный зажим типа В, ретракционный шток 9-inch (230 mm), специальный ретрактор для MICS АКШ и специализированный инструмент для установки подъемника предсердия. Набор лопаток включает зеркало с шариковым фиксатором 53 × 36 mm, пластичный боковой аксессуар для ребер (60 × 35 mm) и пять прогрессивных лезвий размером от 30 × 35 mm до 70 × 35 mm для соответствия глубине грудной клетки конкретного пациента.

Изготовленная полностью из немагнитной медицинской нержавеющей стали с матовой отделкой, компания Retractor Maker поставляет систему Valve XS Retractor System в нестерильном виде, пригодную для автоклавирования, в специальном сверхпрочном алюминиевом контейнере для стерилизации, что обеспечивает быструю оборачиваемость лотков и долговечность.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest