



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador para Columna Posterior Bookwalter

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

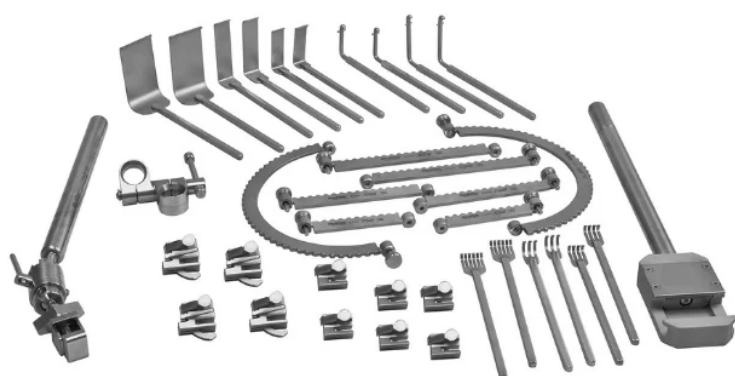

Separador para Columna Posterior Bookwalter

SKU RM-BPSR-1

\$2,399 USD

LISTA DE COMPONENTES

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Poste de Campo	12" (30.5 cm)
1	Acoplador de Poste	Estándar
1	Barra Horizontal	1" de diámetro (2.5 cm)
6	Cremalleras Estándar	Fijas (Sin inclinación)
4	Mecanismos de Cremallera Articulada	Multi-ángulo
1	Segmento de Anillo Semicircular	8½" de diámetro (21.6 cm)
1	Segmento de Anillo Recto	4" de diámetro (10.2 cm)
1	Segmento de Anillo Recto	6" de diámetro (15.2 cm)
1	Segmento de Anillo Recto	8" de diámetro (20.3 cm)
2	Valvas Meyerding	⅔" × 2⅓" (1.7 × 5.9 cm)
2	Valvas Meyerding	1" × 3⅓" (2.5 × 8.5 cm)
2	Valvas Meyerding	2" × 3¾" (5.1 × 9.5 cm)
2	Ganchos Scoville	Pequeños
2	Ganchos Scoville	Grandes

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
2	Rastrillos de 3 Puntas	$\frac{2}{3}$ " Ancho $\times$ $\frac{3}{4}$ " Profundidad (1.7 $\times$ 1.9 cm)
2	Rastrillos de 4 Puntas	$\frac{3}{4}$ " Ancho $\times$ $\frac{1}{3}$ " Profundidad (1.9 $\times$ 0.8 cm)
2	Rastrillos de 6 Puntas	1" Ancho $\times$ $\frac{1}{3}$ " Profundidad (2.5 $\times$ 0.8 cm)
1	Caja de Esterilización	Estuche protector

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador para Columna Posterior Bookwalter es un set de separación quirúrgica autoestático montado en la mesa, diseñado para proporcionar una exposición estable y sin necesidad de asistencia manual durante abordajes posteriores de la columna cervical, torácica y lumbar. El sistema Bookwalter se fija a la mesa de operaciones mediante un poste de campo de 12" (30.5 cm), un acoplador estándar y una barra horizontal de 1" (2.5 cm) de diámetro.

El marco de trabajo es modular. Un segmento de anillo semicircular de 8½" (21.6 cm) se combina con segmentos rectos de 4", 6" y 8" para ensamblar el marco según la longitud y anchura de la incisión. Seis cremalleras estándar fijas y cuatro mecanismos de cremallera articulada multiangulares aseguran las valvas al marco, permitiendo ajustar el ángulo de la valva y la profundidad de retracción de forma independiente.

El instrumental incluido cubre diversos niveles de exposición: valvas Meyerding en tamaños $\frac{2}{3}$ " $\times$ 2½", 1" $\times$ 3½" y 2" $\times$ 3¾"; ganchos Scoville pequeños y grandes; y rastrillos de 3, 4 y 6 puntas. Todos los componentes están fabricados en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético).

El Separador para Columna Posterior Bookwalter se suministra no estéril, es reutilizable y totalmente autoclavable. Debe limpiarse y esterilizarse siguiendo los protocolos validados del centro hospitalario antes de su uso. Retractor Maker fabrica y suministra este set directamente desde Sialkot, Pakistán.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest