

RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Greenberg Retractor Kit

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

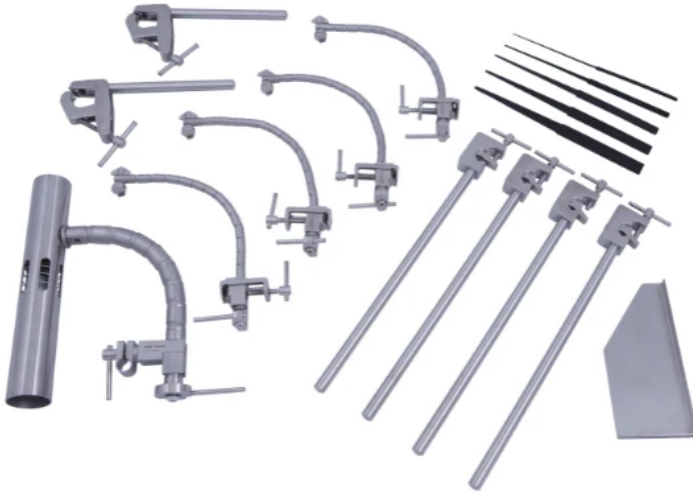

Greenberg Retractor Kit

SKU RM-GRK-1

\$3,499 USD

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
2	Greenberg Retractor Birincil Klempleri	Standart kafatası klembi uyumlu (6 in / 152 mm) — doğrudan Mayfield veya rijit baş tutucu dikmelerine kilitlenir
4	Greenberg Retractor İkincil Klempleri	Standart bar uyumlu (12 in / 305 mm) — dış çerçeveyi oluşturmak için birincil ve ikincil barları birbirine bağlar
4	Greenberg Retractor Uzun Ekartör Kolları	Uzunluk 9.5 in (241 mm) — ekartör uçlarını tutan ve konumlandıran mafsallı sürtünme kolları
1	Greenberg Retractor El Desteği	Uzunluk 10 in (254 mm) — cerrahın ellerini sabitlemek için ergonomik destek platformu
1	Greenberg Retractor Pamukçuk Tepsisi	6.75 in x 3 in (172 mm x 76 mm) — salin emdirilmiş pamukçukları tutmak için çerçeveye monte edilir
1	Greenberg Retractor Sterilizasyon Kutusu	17 in x 10 in x 2.375 in — delikli, ağır hizmet tipi düzenleyici kutu
1	Greenberg Dövülebilir Konik Ekartör Ucu	9 in, Genişlik ¼ in x ¾ in (6 x 19 mm) — geniş kortikal ekartasyon için ekstra geniş uç
1	Greenberg Dövülebilir Konik Ekartör Ucu	9 in, Genişlik 5/32 in x 5/8 in (4 x 16 mm) — lobar ve subtemporal maruziyet için orta genişlikte uç
1	Greenberg Dövülebilir Konik Ekartör Ucu	9 in, Genişlik 1/8 in x 1/2 in (3 x 13 mm) — derin interhemisferik veya sisternal erişim için standart uç

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Greenberg Dövülebilir Konik Ekartör Ucu	9 in, Genişlik 3/32 in × 3/8 in (2.4 × 9.5 mm) — dar kafa tabanı yolları için ince konik uç
1	Greenberg Dövülebilir Konik Ekartör Ucu	9 in, Genişlik 1/16 in × 1/4 in (1.6 × 6 mm) — hassas sinir ve vasküler ekartasyon için mikro uç

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Greenberg Retractor Kit, serebral yapıların stabil ve düşük basınçlı ekartasyonunun hayati önem taşıdığı hassas nöroşirürji prosedürleri için güvenilir ve çok yönlü bir iskelet sağlar. Doğrudan rijit baş tutucu dikmelere monte edilmek üzere tasarlanan bu konfigürasyon, hareketi izole etmek ve nörovasküler anatomiye korumak için kraniyotomi bölgesi üzerinde uyarlanabilir bir yapısal köprü oluşturur.

Standarttan karmaşık nöroşirürji müdahalelerine kadar hazırlıklı olan bu Greenberg Retractor Kit; iki adet 6-inç birincil klemp, dört adet 12-inç ikincil bağlantı klemp, dört adet 9.5-inç mafsallı uzun ekartör kolu ve cerrahın ellerini desteklemek için 10-inç bir el desteği içerir. Kit, entegre bir pamukçuk tepsi ve 19 mm genişliğindeki kortikal uçlardan 1.6 mm mikro uçlara kadar değişen beş adet çift uçlu, dövülebilir konik ekartör ucu ile tamamlanmaktadır.

Manyetik olmayan, tıbbi sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten üretilen ve pürüzsüz, yansıma önleyici saten kaplamaya sahip olan Retractor Maker, Greenberg Retractor Kit ürününü steril olmayan şekilde ve tam tepsi düzeni ile hızlı devir sağlayan 17" × 10" × 2.375" boyutlarında özel delikli sterilizasyon kutusunda tam otoklavlanabilir olarak sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest