



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Kit de Afastador Greenberg

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

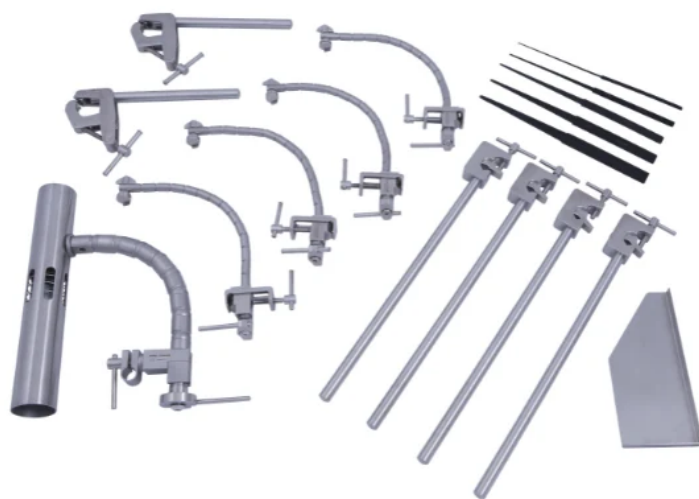

Kit de Afastador Greenberg

SKU RM-GRK-1

\$3,499 USD

LISTA DE COMPONENTES

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
2	Grampos Primários do Afastador Greenberg	Encaixe padrão para grampo de crânio (6 in / 152 mm) — trava diretamente em postes Mayfield ou suportes de cabeça rígidos
4	Grampos Secundários do Afastador Greenberg	Encaixe de barra padrão (12 in / 305 mm) — conecta barras primárias e secundárias para construir a estrutura externa
4	Braços Retratores Longos do Afastador Greenberg	Comprimento 9.5 in (241 mm) — braços de fricção articulados que seguram e posicionam as lâminas do afastador
1	Apoio de Mão do Afastador Greenberg	Comprimento 10 in (254 mm) — plataforma de suporte ergonômico para estabilizar as mãos do cirurgião
1	Bandeja de Compressas do Afastador Greenberg	6.75 in × 3 in (172 mm × 76 mm) — monta na estrutura para segurar algodões/compressas embebidos em soro fisiológico
1	Estojo de Esterilização do Afastador Greenberg	17 in × 10 in × 2.375 in — caixa organizadora perfurada de alta resistência
1	Lâmina de Afastador Greenberg Maleável Afunilada	9 in, Largura ¼ in × ¾ in (6 × 19 mm) — lâmina extra larga para retração cortical ampla
1	Lâmina de Afastador Greenberg Maleável Afunilada	9 in, Largura 5/32 in × 5/8 in (4 × 16 mm) — lâmina de largura média para exposição lobar e subtemporal

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
1	Lâmina de Afastador Greenberg Maleável Afunilada	9 in, Largura $\frac{1}{8}$ in $\times$ $\frac{1}{2}$ in (3 $\times$ 13 mm) — lâmina padrão para acesso inter-hemisférico profundo ou cisternal
1	Lâmina de Afastador Greenberg Maleável Afunilada	9 in, Largura $\frac{3}{32}$ in $\times$ $\frac{3}{8}$ in (2.4 $\times$ 9.5 mm) — lâmina de afunilamento fino para caminhos estreitos na base do crânio
1	Lâmina de Afastador Greenberg Maleável Afunilada	9 in, Largura $\frac{1}{16}$ in $\times$ $\frac{1}{4}$ in (1.6 $\times$ 6 mm) — microlâmina para retração vascular e nervosa delicada

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Kit de Afastador Greenberg fornece uma estrutura confiável e altamente versátil para procedimentos neurocirúrgicos delicados, onde a retração estável e de baixa pressão das estruturas cerebrais é fundamental. Projetado para ser montado diretamente em suportes rígidos de fixação cefálica, esta configuração estabelece uma ponte estrutural adaptável sobre o local da craniotomia para isolar movimentos e proteger a anatomia neurovascular.

Equipado para intervenções neurocirúrgicas padrão a complexas, este Kit de Afastador Greenberg possui dois grampos primários de 6 polegadas, quatro grampos de conexão secundários de 12 polegadas, quatro braços retratores longos articulados de 9.5 polegadas e um apoio de mão de 10 polegadas para suporte ergonômico do cirurgião. O kit é completado com uma bandeja de compressas integrada e cinco lâminas de afastamento maleáveis afuniladas de ponta dupla, variando de larguras corticais amplas de 19 mm até microlâminas de 1.6 mm.

Fabricado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de grau médico não magnético com acabamento acetinado antirreflexo suave, a Retractor Maker fornece o Kit de Afastador Greenberg não estéril e totalmente autoclavável em um estojo de esterilização perfurado de 17" $\times$ 10" $\times$ 2.375" sob medida, garantindo organização completa da bandeja e rápida rotatividade.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)