



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Greenberg Retractor Kit

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

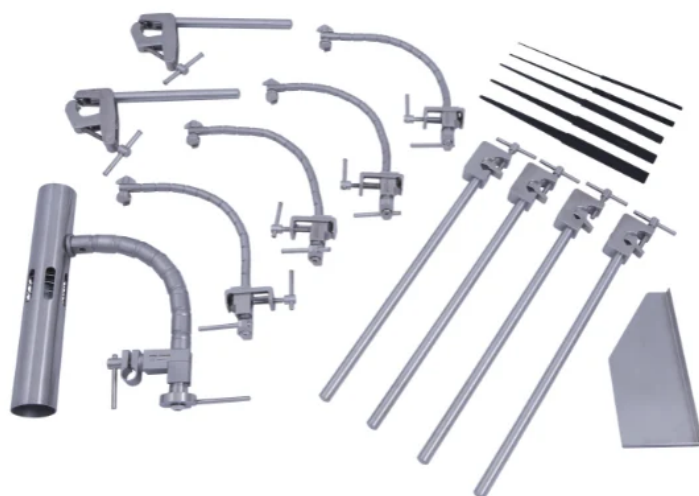

Greenberg Retractor Kit

SKU RM-GRK-1

\$3,499 USD

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
2	Greenberg Retractor Primärklemmen	Standard-Passform für Kopfklemmen (6 in / 152 mm) – arretiert direkt an Mayfield- oder starren Kopfhaltersystemen
4	Greenberg Retractor Sekundärklemmen	Standard-Stangenpassung (12 in / 305 mm) – verbindet Primär- und Sekundärstangen zum Aufbau des Außenrahmens
4	Greenberg Retractor Gelenkarme, lang	Länge 9.5 in (241 mm) – artikulierende Friktionsarme zur Aufnahme und Positionierung der Retraktorvalven
1	Greenberg Retractor Handauflage	Länge 10 in (254 mm) – ergonomische Stützplattform zur Stabilisierung der Chirurgenhände
1	Greenberg Retractor Watteplattenschale	6.75 in × 3 in (172 mm × 76 mm) – Montage am Rahmen zur Aufnahme von kochsalzgetränkten Cottonoids/Patties
1	Greenberg Retractor Sterilisationssieb	17 in × 10 in × 2.375 in – perforierte, robuste Organisationsbox
1	Greenberg biegsame, konische Retraktorvalve	9 in, Breite $\frac{1}{4}$ in × $\frac{3}{4}$ in (6 × 19 mm) – extra breite Valve für großflächige kortikale Retraktion
1	Greenberg biegsame, konische Retraktorvalve	9 in, Breite $\frac{5}{32}$ in × $\frac{5}{8}$ in (4 × 16 mm) – mittlere Breite für lobäre und subtemporale Exposition

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Greenberg biegsame, konische Retraktorvalve	9 in, Breite $\frac{1}{8}$ in $\times$ $\frac{1}{2}$ in (3 $\times$ 13 mm) – Standard-Valve für tiefen interhemisphärischen oder zisternalen Zugang
1	Greenberg biegsame, konische Retraktorvalve	9 in, Breite $\frac{3}{32}$ in $\times$ $\frac{3}{8}$ in (2.4 $\times$ 9.5 mm) – fein konische Valve für schmale Wege an der Schädelbasis
1	Greenberg biegsame, konische Retraktorvalve	9 in, Breite $\frac{1}{16}$ in $\times$ $\frac{1}{4}$ in (1.6 $\times$ 6 mm) – Mikro-Valve für die filigrane Retraktion von Nerven und Gefäßen

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Greenberg Retractor Kit bietet ein zuverlässiges, hochvielseitiges System für filigrane neurochirurgische Eingriffe, bei denen eine stabile Retraktion zerebraler Strukturen mit geringem Druck entscheidend ist. Konzipiert für die direkte Montage an starren Kopfhaltssystemen, bildet diese Konfiguration eine anpassbare strukturelle Brücke über dem Kraniotomiefeld, um Bewegungen zu isolieren und die neurovaskuläre Anatomie zu schützen.

Ausgestattet für Standard- bis hin zu komplexen neurochirurgischen Interventionen, umfasst dieses Greenberg Retractor Kit zwei 6-inch Primärklemmen, vier 12-inch Sekundärklemmen, vier 9.5-inch artikulierende Gelenkarme und eine 10-inch Handauflage zur Entlastung des Chirurgen. Abgerundet wird das Set durch eine integrierte Watteplattenschale (Pattie Tray) und fünf doppelseitige, biegsame, konische Retraktorvalven, die von 19 mm kortikalen Breiten bis hin zu 1.6 mm Mikro-Valven reichen.

Hergestellt aus nicht-magnetischem, medizinischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit reflexionsarmer Satin-Oberfläche, liefert Retractor Maker das Greenberg Retractor Kit unsteril und voll autoklavierbar in einem passgenauen, perforierten Sterilisationssieb (17" $\times$ 10" $\times$ 2.375"), das eine optimale Organisation und schnelle Wiederaufbereitung gewährleistet.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest