



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Autostático Logan

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

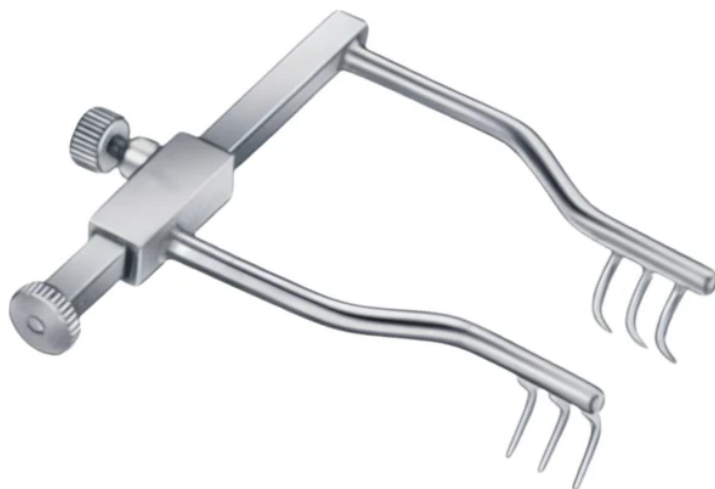

Afastador Autostático Logan

SKU RM-LWS-4CM-1

\$199 USD

LISTA DE COMPONENTES

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
1	Estrutura da Barra Guia Inferior	Chassis de trilho base principal que serve como guia para expandir as margens do tecido
1	Suporte de Braço Deslizante	Componente de suporte móvel que se ajusta horizontalmente ao longo do trilho
2	Mecanismos de Ajuste de Parafuso	Engrenagens de parafuso de travamento de precisão para deslocar e fixar os braços na posição
2	Pontas de Afastamento com Garras	Extremidades de garra antiderrapantes com dentes 3 x 3 afiados e curvos para fora
1	Armazenamento Protetor / Caixa	Embalagem padrão para transporte

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Autostático Logan é um retrator cirúrgico autostático compacto especializado, projetado especificamente para fornecer exposição segura e mãos-livres de tecidos moles e margens de feridas durante cirurgias oftálmicas, plásticas faciais e microrreconstrutivas. Projetado com uma barra de cremalheira horizontal ultracurta, este instrumento permite que os cirurgiões afastem incisões rasas com microprecisão calibrada, eliminando a necessidade de assistência manual enquanto mantém um campo desobstruído sob lupas cirúrgicas e microscópios.

Construído especificamente para corredores anatômicos delicados, esta configuração do Afastador Autostático Logan apresenta um comprimento total de 4 cm (1 ½ inches, \$199). Fabricado à mão em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), a configuração da extremidade de trabalho incorpora pontas

de garra antiderrapantes armadas com dentes 3 × 3 afiados e curvos para fora, projetados especificamente para ancorar com segurança em aponeuroses densas, periósteo e margens musculares sem deslizar. O suporte do braço deslizante desloca-se suavemente ao longo da barra guia inferior e trava rigidamente através de dois mecanismos de ajuste de parafuso de precisão para eliminar a fadiga do usuário.

Forjado com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador Autostático Logan para suportar ciclos repetitivos de autoclave hospitalar, fornecendo aos centros de cirurgia oftálmica, clínicas plásticas e salas de microcirurgia craniana em todo o mundo excepcional rigidez estrutural, resistência à corrosão e durabilidade total em autoclave.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)