



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ретракторы для печени «Змея»

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

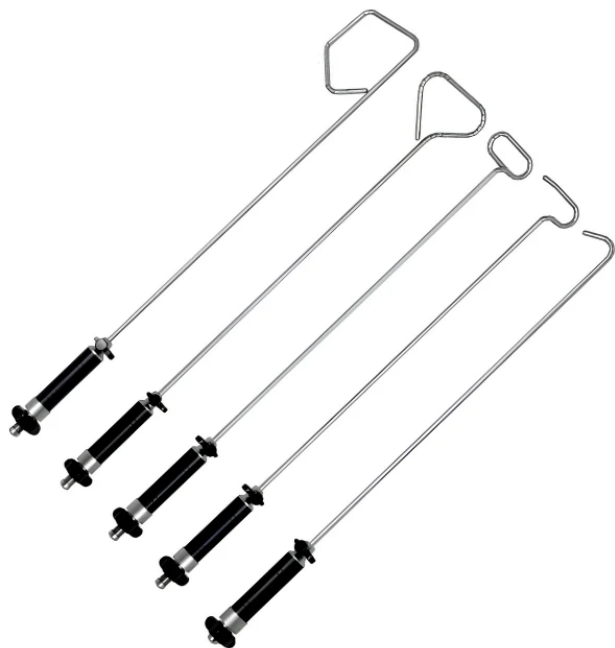

Ретракторы для печени «Змея»

SKU RM-SLR-SERIES-1

\$299 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Модель с треугольным наконечником	RM-SLR-TRI-1	\$299
Модель с наконечником «Желудочный бандаж»	RM-SLR-GB-1	\$299
Модель с круглым наконечником	RM-SLR-CIR-1	\$299
Модель с крючкообразным наконечником	RM-SLR-HOOK-1	\$299
Модель с многоугольным наконечником	RM-SLR-POLY-1	\$299
Полный набор из 5 моделей	RM-SLR-SERIES-1	\$1,399

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ретракторы для печени «Змея» представляют собой основную серию лапароскопических инструментов для поднятия печени, разработанных специально для обеспечения безопасного, широкоповерхностного смещения внутренних органов и ретракции долей печени во время малоинвазивных операций на верхних отделах желудочно-кишечного тракта, бариатрических и билиарных операций. Разработанные с ультрагладкой дистальной геометрией, которая вводится через стандартные 5-мм троакары, эти ретракторы равномерно распределяют удерживающие силы под паренхимой печени, предотвращая разрывы капсулы, подкапсульные гематомы или очаговые ишемические повреждения, одновременно создавая беспрепятственный оптический коридор к желудку и пищеводному отверстию.

Разработанная в соответствии с клиническими требованиями, эта линейка ретракторов для печени «Змея» имеет диаметр стержня 5 мм и рабочую длину 330 мм, оснащенную специальным встроенным портом для промывки, который позволяет проводить тщательную ферментативную деконтаминацию через просвет канюли. Изготовленные вручную из немецкой нержавеющей стали, хирурги могут выбирать между прямыми или угловыми профилями стержня/конца из пяти специализированных геометрий наконечников: треугольный для широкого бокового поднятия доли, «Желудочный бандаж» для бариатрического туннелирования, круглый для диффузного удержания брюшины, крючкообразный для целенаправленного зацепления связок и многоугольный для многоплоскостной поддержки тканей (299 долларов США за штуку или 1399 долларов США за полный набор из 5 штук). Эргономичный задний диск легко контролирует дистальное позиционирование.

Изготовленные с антибликовым сатинированным матовым покрытием, Retractor Maker производит ретракторы для печени «Змея» для многократных циклов автоклавирувания в больницах, предоставляя малоинвазивным общехирургическим отделениям, бариатрическим центрам и операционным отделениям по лечению заболеваний пищеварительной системы по всему миру исключительную механическую долговечность, коррозионную стойкость и полную надежность при автоклавирувании.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest