



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Autoestático Balfour Baby

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

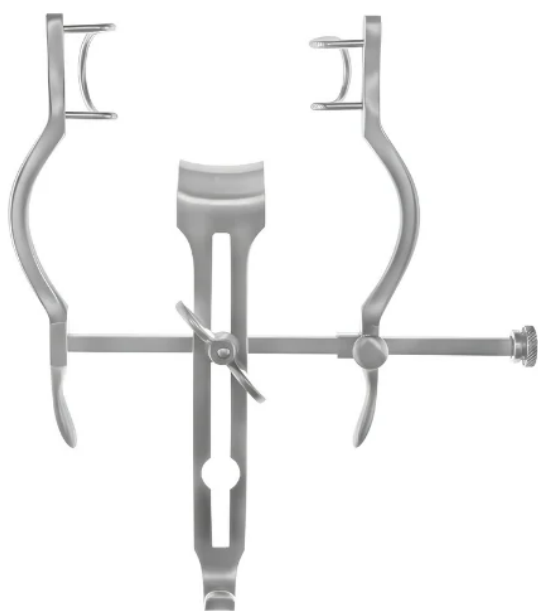

Separador Autoestático Balfour Baby

SKU RM-BBSRR-1

\$299 USD

LISTA DE COMPONENTES

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1 Juego (2 valvas)	Valvas Laterales	60 mm de profundidad
1	Valva Central Balfour	21 mm de ancho × 24 mm de profundidad
1	Marco de Separador Balfour	125 × 90 mm

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Autoestático Balfour Baby es un instrumento quirúrgico pediátrico especializado, diseñado para proporcionar una exposición atraumática y autoestática en campos quirúrgicos neonatales, pediátricos y abdominales menores. Construido con proporciones reducidas, este instrumento ofrece una contratracción constante y manos libres sin congestionar los espacios anatómicos delicados.

Diseñado específicamente para espacios anatómicos reducidos, este set completo de Separador Autoestático Balfour Baby cuenta con un marco de apertura ágil de 125 × 90 mm, un par de valvas laterales de 60 mm de profundidad y una valva central compacta de 21 × 24 mm para el desplazamiento visceral y pélvico dirigido. El tornillo de mariposa de rosca fina del marco permite a los equipos quirúrgicos controlar la tensión de apertura suavemente en incrementos milimétricos, evitando el estiramiento excesivo del tejido.

Fabricado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico con un acabado satinado mate antirreflejante, Retractor Maker suministra el Separador Autoestático Balfour Baby no estéril y totalmente autoclavable dentro de una caja protectora individual, ofreciendo una durabilidad clínica excepcional para los departamentos de cirugía pediátrica.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest