



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

McCarthy Mini-Sternotomy Retractor with Universal Lift

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron

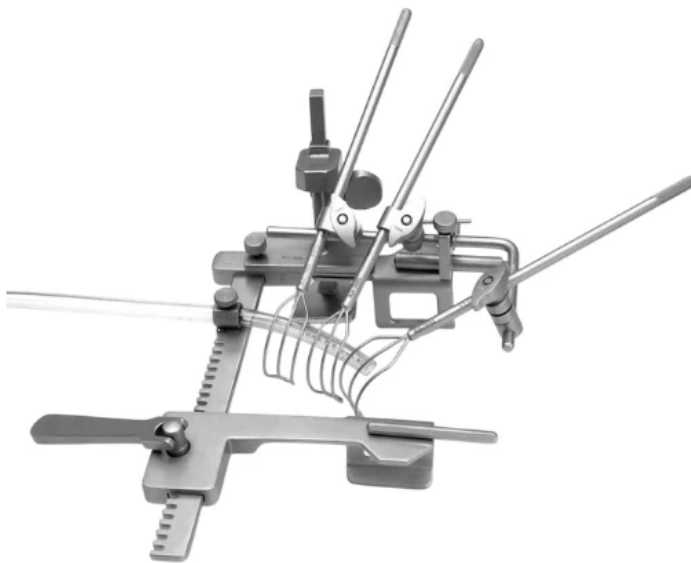

McCarthy Mini-Sternotomy Retractor with Universal Lift

SKU RM-MMSR-1

\$699 USD

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Chest Spreader Dual Bars	Modifizierter 5-Zoll-Hauptrahmen zur Sternalspreizung
1	Split Universal Clamp	Spezialisierte Montageklemme zur Sicherung von Rahmenzubehör
1	Universal Clamp	Mehrzweck-Klemmblock zur Komponentenintegration
1	Main Bracket	Hauptmontagehalterung zur Unterstützung zusätzlicher Retraktorarme
1	Tube Holder	Sichert chirurgische Schläuche innerhalb des Operationsfeldes
1	Right Angle Transverse Bar	Strukturelle Querstange zur Positionierung von Hilfsretraktorelementen
1	Large Wire Basket Retractor (Malleable)	Breiter, biegsamer Drahtkorb zur schonenden Gewebeverdrängung
2	Small Wire Basket Retractor (Malleable)	Kompakte, biegsame Drahtkörbe für die gezielte Geweberetraktion

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der McCarthy Mini-Sternotomy Retractor with Universal Lift ist ein fortschrittliches System für die Herzchirurgie, das speziell für minimalinvasive Klappen- und Aortenoperationen entwickelt wurde, bei denen ein minimales chirurgisches Trauma erforderlich ist. Durch die Kombination einer zuverlässigen lateralen Sternalspreizung mit

unabhängigen vertikalen Hebefunktionen hebt dieses System den linken Sternumrand an, um eine direkte Sichtausrichtung auf das Atrium und die Herzklappen zu ermöglichen.

Das für präzise thorakale Positionierung konzipierte McCarthy Mini-Sternotomy Retractor with Universal Lift System umfasst einen modifizierten 5-Zoll-Doppelsteg-Brustkorbspreizer, eine integrierte abnehmbare Universal Lift-Einheit, eine geteilte Universalklemme, eine Standard-Universalklemme, eine Haupthalterung sowie eine zusätzliche rechtwinklige Querstange. Das System ist mit einem Saug-/Spülschlauchhalter und drei biegsamen Drahtkorb-Retraktoren (ein großer und zwei kleine) ausgestattet, die sich ohne fokales Trauma an die Herzgeweberänder anpassen.

Hergestellt aus medizinischem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit nicht reflektierendem Satin-Finish, liefert Retractor Maker den McCarthy Mini-Sternotomy Retractor with Universal Lift unsteril und voll autoklavierbar in einem robusten Aufbewahrungsbehälter, der chirurgische Langlebigkeit und zuverlässige Leistung im OP garantiert.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest