



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Bookwalter Small Incision Retractor System

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

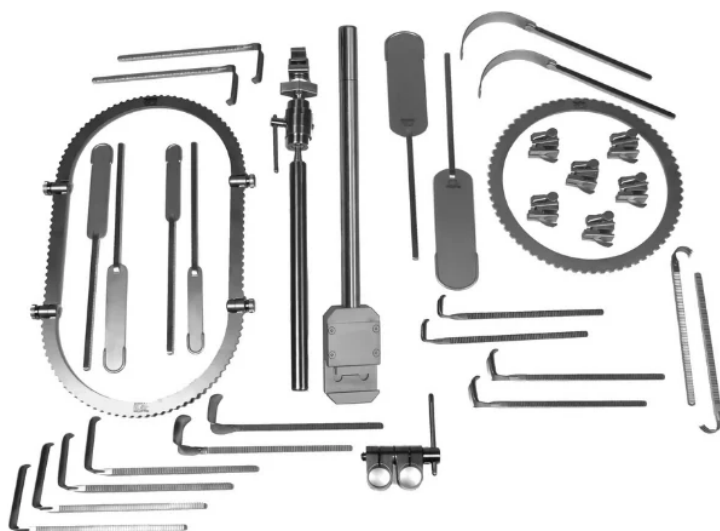

Bookwalter Small Incision Retractor System

SKU RM-BSIRS-1

\$2,199 USD

コンポーネントリスト

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
1	フィールドポスト	12" (30 cm) 垂直支持ロッド
1	ステンレス製ポストカプラー	1" × 1" (2.5 × 2.5 cm) 高耐久レールクランプ
1	水平フレックスバー	1" 径 (2.5 cm) 多関節アーム
1	小型ラウンドソリッドリング	内径 8½" (21.3 cm)
1	小型オーバルセグメントリング	8½" × 14" (20 × 35 cm) ヒンジ式可変フレーム
6	チルトラチェット	ロープロファイル型フレームロック機構
2	マリアブルブレード	1" × 3½" (2.5 × 12.5 cm)
2	マリアブルブレード	¾" × 4" (1.9 × 10 cm)
2	マリアブルブレード	2" × 6" (5 × 15 cm)
2	Deaver ブレード	1" × 3½" (2.5 × 8.8 cm) 曲線状骨盤用ブレード
2	Kelly ブレード	2" × 1½" (5 × 3.8 cm) 浅型直角ブレード
2	Kelly ブレード	1" × 2½" (2.5 × 6.3 cm) 直角ブレード
2	Kelly ブレード	1" × 3" (2.5 × 7.5 cm) 直角ブレード
2	ディープレーキブレード	¾" 深 × ⅔" 幅 (1.9 × 1.7 cm) 多歯爪

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
2	Richardson ブレード	¾" × 2" (1.9 × 5 cm) 浅型フラットリップ
2	Richardson ブレード	1" × 1¼" (2.5 × 3.1 cm) 浅型フラットリップ
2	Richardson ブレード	¾" × 1" (1.9 × 2.5 cm) 浅型フラットリップ
1	滅菌ボックス	整理・収納用専用有孔コンテナ

製品詳細

Bookwalter Small Incision Retractor Systemは、テーブル固定式の自己保持型開創システムです。手術台に固定して各ブレードを所定の位置で保持することで、組織の損傷を最小限に抑えつつ、精密なアクセスが必要な小切開手術において安定したハンズフリーの術野展開を実現します。

マウントシステムは、12" (30 cm) フィールドポスト、1" × 1" (2.5 × 2.5 cm) 高耐久ステンレス製ポストカブラー（レールクランプ）、および直径1" (2.5 cm) の多関節水平フレックスバーで構成されています。リングは2種類付属しており、内径 8½" (21.3 cm) の小型ラウンドソリッドリングと、切開部位に合わせて形状を変更できるヒンジ式の 8½" × 14" (20 × 35 cm) 小型オーバルセグメントリングが含まれます。

6個のロープロファイル・チルトラチェットがリングにロックされ、各ブレードを必要な深さと角度で固定します。ブレードセットには、3種のマリアブルブレード、曲線状の Deaver 骨盤ブレード、3種の浅型直角 Kelly ブレード、多歯ディーブレーキブレード、3種の浅型フラットリップ Richardson ブレードが含まれており、小さな切口から段階的に術野を構築することが可能です。

すべてのコンポーネントは非磁性のサージカルグレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）で製造されています。本システムは新品の再利用可能製品で、完全オートクレーブ対応です。非滅菌状態で提供されるため、使用前に医療施設の検証済み手順に従って洗浄・滅菌を行ってください。各パーツを整理して処理・保管できる専用の有孔滅菌ボックスに収納されています。Retractor Maker はパキスタンのシアルコートで本システムを製造し、病院、外科医、代理店へ直接供給しています。最小注文数量は1セットからです。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest