



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Система ранорасширителя Bookwalter GYN Magrina
для тазовой хирургии

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021

✓ ISO 9001:2015

✓ EN ISO 7153-1:2016


✓ cGMP Approved

✓ SCCI Registered since 2023

✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron

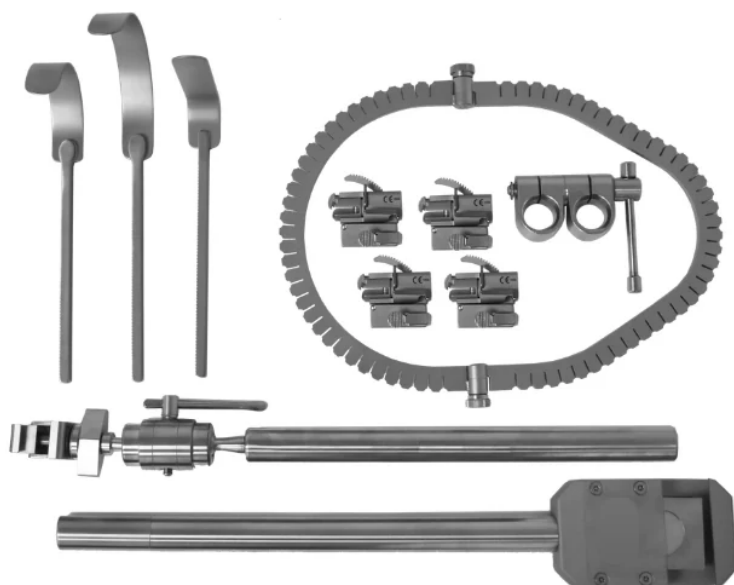

Система ранорасширителя Bookwalter GYN Magrina для тазовой хирургии

SKU RM-BGMPRS-1

\$1,499 USD

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Вертикальная стойка (Field Post)	12" (30 cm)
1	Муфта стойки (Post Coupler)	Стандартная
1	Горизонтальная гибкая штанга	Стандартная многошарнирная
1	Перинеальное кольцо с прорезями	9½" × 14½" (24.1 × 36.8 cm)
4	Поворотный наклонный храповик	Стандартный с фиксацией кольца
2	Вагинальные латеральные лопатки	1" × 3" (2.5 × 7.6 cm)
1	Лопатка Deaver	1" × 3½" (2.5 × 8.9 cm)
1	Лопатка Deaver	1" × 5" (2.5 × 12.7 cm)
1	Вагинальная задняя лопатка	1" × 4½" (2.5 × 11.4 cm)
1	Стерилизационный бокс	Защитный кейс

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Система ранорасширителя Bookwalter GYN Magrina для тазовой хирургии представляет собой фиксируемый к столу самодерживающийся ретрактор, разработанный для обеспечения стабильной экспозиции без участия рук во время гинекологических, вагинальных и тазовых операций. Модульный каркас объединяет стойку, горизонтальную гибкую штангу, муфту стойки, прорезное перинеальное

кольцо и поворотные наклонные храповые механизмы для поддержки выбранных лопаток вокруг операционного поля.

Система укомплектована прорезным перинеальным кольцом размером 9½" × 14½" и четырьмя поворотными наклонными храповиками с фиксацией на кольце. Входящие в комплект латеральные вагинальные лопатки, зеркала Deaver и задняя вагинальная лопатка обеспечивают широкий спектр конфигураций для нужд хирургической экспозиции.

Полная система поставляется в специализированном защитном стерилизационном боксе для организованного хранения и обработки. Система Bookwalter GYN Magrina поставляется нестерильной, предназначена для многократного использования и автоклавирования. Очистка и стерилизация должны проводиться в соответствии с валидированными процедурами медицинского учреждения перед использованием.

Retractor Maker предоставляет систему Bookwalter GYN Magrina напрямую больницам, дистрибьюторам и другим B2B-клиентам.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest