



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Bookwalter StrongArm ベーシック一般外科開創器システム

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron

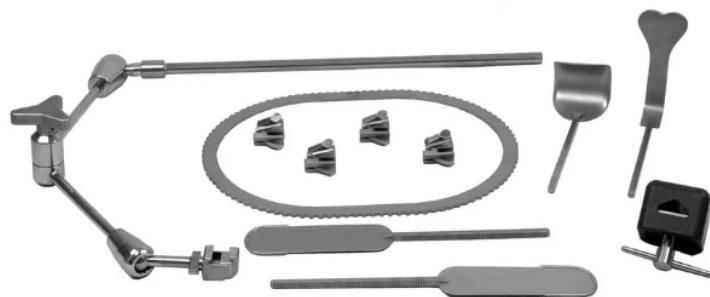

Bookwalter StrongArm ベーシック ク一般外科開創器シ ステム

SKU RM-BSABGRS-1

\$1,499 USD

コンポーネントリスト

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
1	トップマウント StrongArm PLUS ホルダー	高さ調節可能 / 多関節型
1	オーバルリング (中)	10½" × 14½" (26.7 × 36.8 cm)
1	ヘビーデューティー・レールクランプ	テーブルレール対応
4	チルトラチェット機構	マルチアングル
1	Balfour 弁	2⅝" × 3" (6.7 × 7.6 cm)
1	Harrington 弁	1" × 5⅝" × 2½" (2.5 × 14.3 × 6.4 cm)
2	可塑性弁	2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)
1	滅菌ボックス	保護ケース

製品詳細

Bookwalter StrongArm ベーシック一般外科開創器システムは、StrongArm PLUS ホルダーおよびポジショナーに取り付けられる自動固定式開創器システムです。ホルダーは手術台に固定され、開創フレームを所定の位置に保持することで、開腹一般外科手術において安定したハンズフリーの術野展開を提供します。

マウントシステムは、テーブルレールに対応したヘビーデューティー・レールクランプと、高さ調節可能な多関節型トップマウント StrongArm PLUS ホルダーで構成されています。ホルダーは 10½" × 14½" (26.7 × 36.8 cm) の中型オーバルリングを保持し、切開部位の上に配置して必要な作業高さと角度でロックできます。

4つのマルチアングル・チルトラチェット機構がリングにクランプされ、各弁を選択した深さと傾斜で保持します。標準的な弁の構成には、Balfour 弁 $2\frac{5}{8}" \times 3"$ (6.7×7.6 cm) 1枚、Harrington 弁 $1" \times 5\frac{5}{8}" \times 2\frac{1}{2}"$ ($2.5 \times 14.3 \times 6.4$ cm) 1枚、および可塑性弁 $2" \times 6"$ (5.1×15.2 cm) 2枚が含まれます。

すべてのコンポーネントは、非磁性の外科用グレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）で製造されています。Bookwalter StrongArm ベーシック一般外科開創器システムは新品で再利用およびオートクレーブ滅菌が可能であり、未滅菌で提供されます。使用前に医療施設の承認された手順に従って洗浄および滅菌を行ってください。本システムはコンポーネントを保護・整理する滅菌ボックスに収納されています。Retractor Maker はパキスタンのシアルコートで本システムを製造し、病院、外科医、代理店に直接供給しており、最小注文数量は1フルセットとなります。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest