



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Denis-Browne Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron

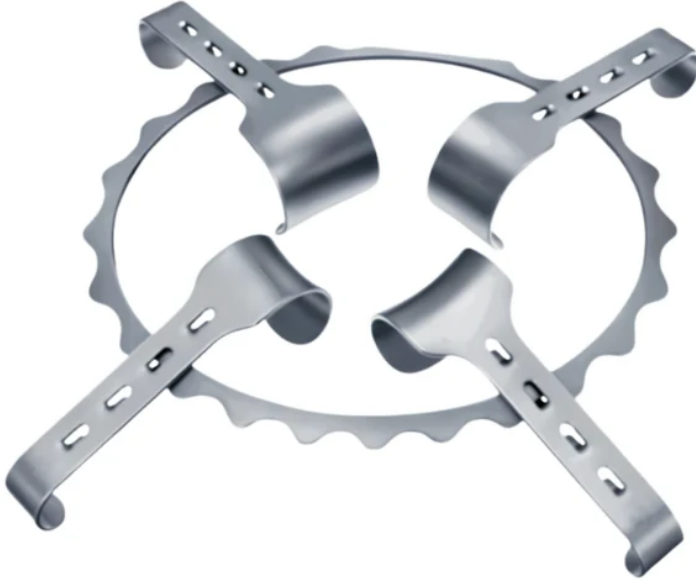

Denis-Browne Retractor

SKU RM-DBR-SET-1

\$499 USD

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Kendinden Sabitlemeli Dairesel Taban Çerçevesi	Her yönden görünürlük sağlayan 175 mm x 150 mm şasi
2 (1 Çift)	Değiştirilebilir Sığ Doku Paller	Hassas katmanlar için ideal 40 mm x 30 mm kavisli uçlar
2 (1 Çift)	Değiştirilebilir Derin Doku Paller	Hacimli dokular için optimize edilmiş 40 mm x 40 mm kavisli uçlar
4	Hızlı Kayar Değiştirilebilir Pimli Kilitler	Parmak yorgunluğunu azaltan kaydır ve kilit mekanizması
1	Koruyucu Saklama / Kutu	Standart taşıma ambalajı

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Denis-Browne Retractor, özellikle pediatrik, abdominal ve pelvik operasyonlar sırasında geniş, 360 derecelik radyal yumuşak doku ve yara kenarı deplasmanı sağlamak üzere tasarlanmış, uluslararası alanda kabul görmüş kendinden sabitlemeli bir cerrahi retractor sistemidir. Çevreleyen bir halka çerçeve ile tasarlanan bu alet, cerrahların insizyon boyunca herhangi bir vektöre birden fazla değiştirilebilir pal yerleştirmesine olanak tanıyarak asistan el yorgunluğunu ortadan kaldırırken açık ve statik bir görsel koridor sağlar.

Klinik çerçeve spesifikasyonlarına göre üretilen bu Denis-Browne Retractor tam seti (\$499), derin operasyon alanlarında her yönden görünürlük sağlayan 175 mm x 150 mm yapısal halka düzenine sahip kendinden sabitlemeli dairesel bir taban çerçevesi içerir. Birinci sınıf ameliyathane sınıfı Alman paslanmaz çeliğinden el işçiliğiyle üretilen sistem, iki adet değiştirilebilir sığ doku pali (hassas katmanlar için ideal 40 mm x 30 mm kavisli uçlar) ve iki adet değiştirilebilir derin doku pali (hacimli dokular için optimize edilmiş 40 mm x 40 mm

kavisli uçlar) içeren entegre bir pal çeşitliliği sunar. Dört adet hızlı kayar değiştirilebilir pimli kilit, parmak yorgunluğunu azaltmak ve intraoperatif ayarlamaları hızlandırmak için palleri anında sabitler.

Yansıma önleyici saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker, Denis-Browne Retractor'ı tekrarlayan hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde üretmekte; dünya çapındaki pediatrik cerrahi ünitelerine, ürolojik ameliyathanelere ve genel laparotomi merkezlerine olağanüstü dayanıklılık, korozyon direnci ve tam otoklavlanabilirlik sunmaktadır.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest