



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de plaie Logan Wound Spreader

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

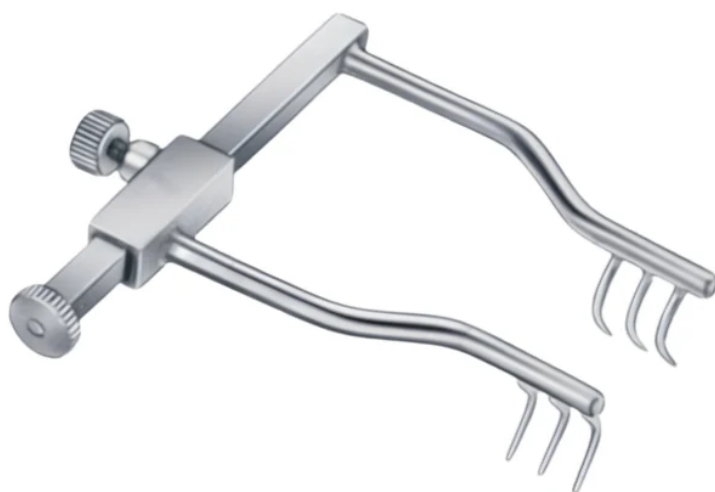

Écarteur de plaie Logan Wound Spreader

SKU RM-LWS-4CM-1

\$199 USD

LISTE DES COMPOSANTS

QUANTITÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Cadre de barre de guidage à crémaillère inférieure	Châssis de base servant de guide pour l'expansion des marges tissulaires
1	Support de bras coulissant	Composant de support mobile s'ajustant horizontalement le long du rail
2	Mécanismes de réglage à vis	Engrenages à vis de blocage de précision pour déplacer et fixer les bras en position
2	Pointes d'écartement à griffes	Mâchoires antidérapantes dotées de 3 × 3 dents pointues recourbées vers l'extérieur
1	Boîte / Stockage de protection	Emballage de transport standard

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le Logan Wound Spreader est un écarteur chirurgical autostatique compact spécialisé, conçu spécifiquement pour assurer une exposition sûre et mains libres des tissus mous et des marges de la plaie lors de chirurgies ophtalmiques, plastiques faciales et micro-reconstructrices. Doté d'une barre à crémaillère horizontale ultra-courte, cet instrument permet aux chirurgiens d'écarter les incisions peu profondes avec une micro-précision calibrée, éliminant ainsi le besoin de positionnement manuel par un assistant tout en maintenant un champ opératoire dégagé sous loupes et microscopes.

Conçu spécifiquement pour les corridors anatomiques délicats, cette configuration du Logan Wound Spreader présente une longueur totale d'instrument de 4 cm (1 ½ pouces, \$199). Fabriqué à la main à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), la configuration de l'extrémité active intègre des mâchoires antidérapantes armées de 3 × 3 dents pointues recourbées vers l'extérieur, spécifiquement

conçues pour s'ancrer en toute sécurité dans l'aponévrose dense, le périoste et les marges musculaires sans glisser. Le support de bras coulissant se déplace en douceur le long de la barre de guidage inférieure et se verrouille rigidement via deux mécanismes de réglage à vis de précision pour éliminer la fatigue de l'utilisateur.

Forgé avec une finition mate satinée antireflet, Retractor Maker fabrique le Logan Wound Spreader pour résister aux cycles répétitifs d'autoclave hospitalier, offrant aux centres de chirurgie ophtalmique, aux cliniques de chirurgie plastique et aux suites de microchirurgie crânienne du monde entier une rigidité structurelle exceptionnelle, une résistance à la corrosion et une durabilité complète à l'autoclavage.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)