



# RETRACTOR MAKER

## ÜRÜN BROŞÜRÜ

Bookwalter Rectal/Trans-Anal Cerrahi Ekartör

### CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron

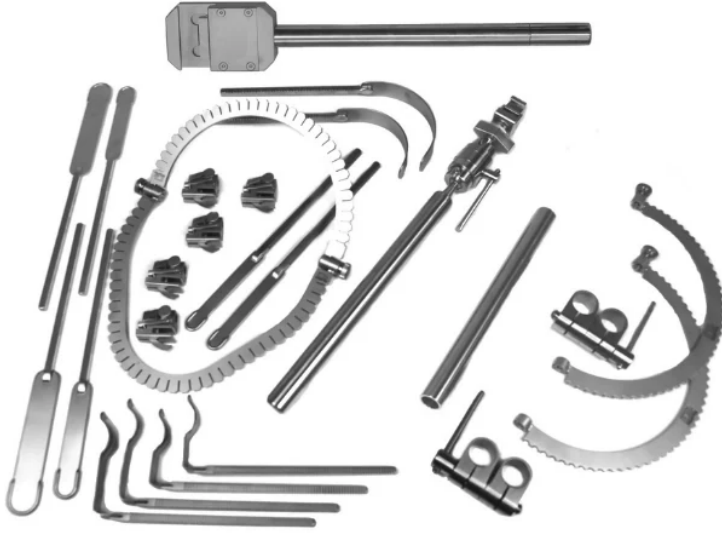

# Bookwalter Rectal/Trans-Anal Cerrahi Ekartör

SKU RM-BRTASR-1

**\$2,199 USD**

## BİLEŞEN LİSTESİ

| ADET | BİLEŞEN                                                                      | BOYUTLAR / AÇIKLAMA            |
|------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1    | Saha Postu                                                                   | 12" (30 cm)                    |
| 2    | Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan) Post Kuplörleri | 1" x 1" (2.5 cm x 2.5 cm)      |
| 2    | Yatay Esnek Barlar                                                           | 1" Çap (2.5 cm)                |
| 1    | Dikey Uzatma Barı                                                            | 12" (30 cm)                    |
| 5    | Eğilebilir Mandallar                                                         | Standart Çok Açılı             |
| 1    | Küçük Yarım Daire Halka                                                      | 8½" (21.3 cm) İç Çap           |
| 1    | Segmentli Perineal Halka                                                     | 9½" x 14½" (23.8 cm x 36.3 cm) |
| 2    | Rektal Paller                                                                | 7/8" x 37/8" (2.2 cm x 9.7 cm) |
| 2    | Rektal Paller                                                                | 7/8" x 27/8" (2.2 cm x 7.2 cm) |
| 2    | Malleable Paller                                                             | 1" x 3½" (2.5 cm x 10 cm)      |
| 2    | Malleable Paller                                                             | ½" x 4" (1.3 cm x 8.8 cm)      |
| 2    | Malleable Paller                                                             | ¾" x 4" (1.9 cm x 10 cm)       |
| 2    | Deaver Paller                                                                | 1" x 3½" (2.5 cm x 8.8 cm)     |
| 1    | Sterilizasyon Kutusu                                                         | Koruyucu Kasa                  |

## ÜRÜN AÇIKLAMASI

Bookwalter Rectal/Trans-Anal Cerrahi Ekartör, kolorektal, trans-anal, rektal ve perineal prosedürler sırasında stabil, eller serbest cerrahi görüş sağlamak üzere tasarlanmış, ameliyat masasına monte edilen kendinden tutmalı bir ekartör sistemidir. Montaj iskeleti, çerçevenin ameliyat masasına ve hasta pozisyonuna göre esnek bir şekilde konumlandırılmasına olanak tanıyan bir adet 12" (30 cm) saha postu, iki adet 1" çapında yatay esnek bar, bir adet 12" (30 cm) dikey uzatma barı ve iki adet 1" x 1" Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan) post kuplörü kullanır.

Çalışma çerçevesi, cerrahi yaklaşıma bağlı olarak 9½" x 14½" (23.8 x 36.3 cm) segmentli perineal halka veya 8½" (21.3 cm) iç çaplı küçük yarım daire halkadan monte edilebilir. Halkaya takılan beş standart çok açılı eğilebilir mandal, her bir palin bağımsız olarak açılanmasını ve gerilmesini sağlar.

Setteki pal grubu geniş bir ekarte gereksinimi yelpazesini kapsar: 7/8" x 37/8" ve 7/8" x 27/8" boyutlarında rektal paller, 1" x 3½", ½" x 4" ve ¾" x 4" boyutlarında malleable paller ve 1" x 3½" Deaver paller. Tüm bileşenler manyetik olmayan, cerrahi sınıf Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten üretilmiştir ve özel bir sterilizasyon kutusu içinde sunulur.

Bookwalter Rectal/Trans-Anal Cerrahi Ekartör steril olmayan şekilde sunulur, tekrar kullanılabilir ve tamamen otoklavlanabilir. Kullanım öncesinde sağlık kuruluşunun onaylanmış prosedürlerine göre temizlenmeli ve sterilize edilmelidir. Retractor Maker, sistemi Sialkot, Pakistan'da üretmekte ve doğrudan hastanelere, cerrahlara ve distribütörlere tedarik etmektedir.



# TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

## RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

**info@retractormaker.com**

WhatsApp

**+92 327 8345101**

Web Siteleri

**retractormaker.com**  
**retractormanufacturer.com**

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

## BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest