



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Bookwalter Posterior Spinal Ekartör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

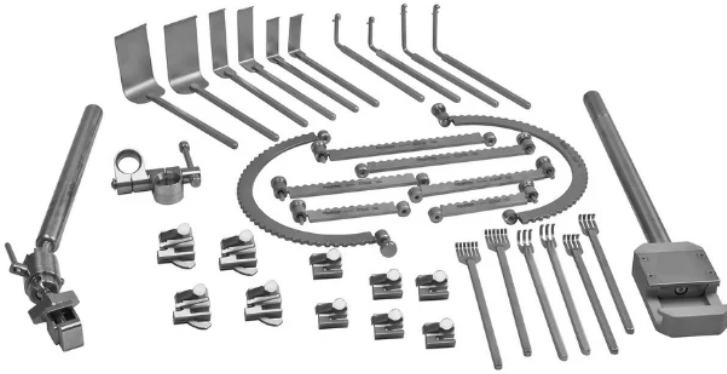

Bookwalter Posterior Spinal Ekartör

SKU RM-BPSR-1

\$2,399 USD

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Saha Postu	12" (30.5 cm)
1	Post Kuplörü	Standart
1	Yatay Bar	1" Çap (2.5 cm)
6	Standart Cırcırlar	Eğimsiz
4	Eğimli Cırcır Mekanizmaları	Çok Açılı
1	Yarım Daire Halka Segmentleri	8½" Çap (21.6 cm)
1	Düz Halka Segmenti	4" Çap (10.2 cm)
1	Düz Halka Segmenti	6" Çap (15.2 cm)
1	Düz Halka Segmenti	8" Çap (20.3 cm)
2	Meyerding Bıçakları	⅔" x 2⅓" (1.7 x 5.9 cm)
2	Meyerding Bıçakları	1" x 3⅓" (2.5 x 8.5 cm)
2	Meyerding Bıçakları	2" x 3¾" (5.1 x 9.5 cm)
2	Scoville Kancaları	Küçük
2	Scoville Kancaları	Büyük

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
2	3 Tırnaklı Tırmıklar	$\frac{2}{3}$ " Genişlik x $\frac{3}{4}$ " Derinlik (1.7 x 1.9 cm)
2	4 Tırnaklı Tırmıklar	$\frac{3}{4}$ " Genişlik x $\frac{1}{3}$ " Derinlik (1.9 x 0.8 cm)
2	6 Tırnaklı Tırmıklar	1" Genişlik x $\frac{1}{3}$ " Derinlik (2.5 x 0.8 cm)
1	Sterilizasyon Kutusu	Koruyucu Kasa

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Bookwalter Posterior Spinal Ekartör, servikal, torasik ve lomber omurgaya posterior yaklaşımlar sırasında stabil, eller serbest cerrahi görüş sağlamak üzere tasarlanmış masaya monte edilen otomatik tutmalı bir ekartör setidir. Bookwalter Posterior Spinal Ekartör, 12" (30.5 cm) bir saha postu, standart bir post kuplörü ve 1" (2.5 cm) çapında yatay bir bar kullanılarak ameliyat masasına monte edilir.

Çalışma çerçevesi modülerdir. 8½" (21.6 cm) yarım daire halka segmenti; 4", 6" ve 8" düz halka segmentleriyle birleşerek çerçevenin insizyonun uzunluğuna ve genişliğine göre monte edilmesine olanak tanır. Altı standart eğimsiz cırcır ve dört çok açılı eğimli cırcır mekanizması, bıçakları çerçeveye sabitler ve bıçak açısı ile ekarte derinliğinin bağımsız olarak ayarlanmasını sağlar.

Ürünle birlikte gelen ekartasyon donanımı geniş bir görüş yelpazesini kapsar: $\frac{2}{3}$ " x $2\frac{1}{3}$ ", 1" x $3\frac{1}{3}$ " ve 2" x $3\frac{3}{4}$ " boyutlarında Meyering bıçakları, küçük ve büyük Scoville kancaları ile 3, 4 ve 6 tırnaklı tırmıklar. Tüm bileşenler manyetik olmayan, cerrahi sınıf Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten üretilmiştir ve özel bir sterilizasyon kutusu içinde sunulur.

Bookwalter Posterior Spinal Ekartör steril olmayan şekilde sunulur, yeniden kullanılabilir ve tamamen otoklavlanabilir. Kullanmadan önce sağlık kuruluşunun doğrulanmış prosedürlerine göre temizlenmeli ve sterilize edilmelidir. Retractor Maker, seti doğrudan Sialkot, Pakistan'dan üretmekte ve tedarik etmektedir.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest