



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Bookwalter Rectal/Trans-Anal Surgery Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

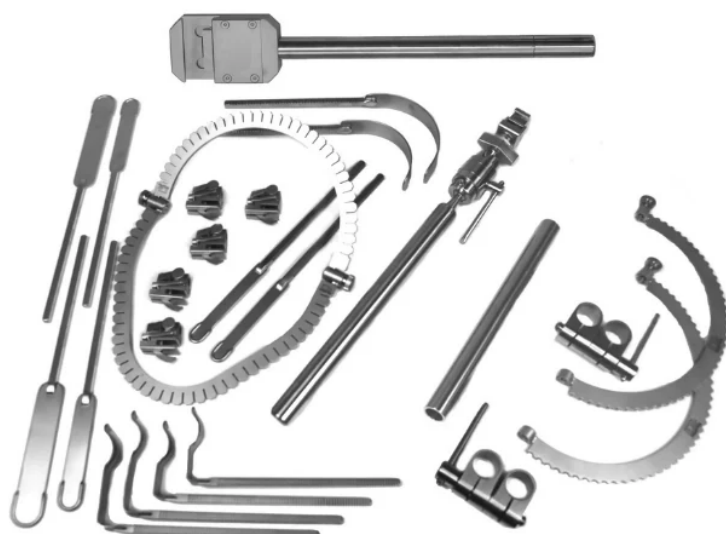

Bookwalter Rectal/Trans-Anal Surgery Retractor

SKU RM-BRTASR-1

\$2,199 USD

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Stativ	12" (30 cm)
2	Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch)-Stativkupplungen	1" x 1" (2.5 cm x 2.5 cm)
2	Horizontale Flex-Arme	1" Durchmesser (2.5 cm)
1	Vertikale Verlängerungsstange	12" (30 cm)
5	Kipp-Ratschen	Standard, winkelverstellbar
1	Kleiner Halbkreisring	8½" (21.3 cm) ID
1	Segmentierter Perinealring	9½" x 14½" (23.8 cm x 36.3 cm)
2	Rektal-Valven	7⁄8" x 37⁄8" (2.2 cm x 9.7 cm)
2	Rektal-Valven	7⁄8" x 27⁄8" (2.2 cm x 7.2 cm)
2	Biegsame Valven	1" x 3½" (2.5 cm x 10 cm)
2	Biegsame Valven	½" x 4" (1.3 cm x 8.8 cm)
2	Biegsame Valven	¾" x 4" (1.9 cm x 10 cm)
2	Deaver-Valven	1" x 3½" (2.5 cm x 8.8 cm)
1	Sterilisationssieb	Schutzbehälter

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Bookwalter Rectal/Trans-Anal Surgery Retractor System ist ein tischmontiertes, selbsthaltendes Retraktorsystem, das für eine stabile, freihändige chirurgische Exposition bei kolorektalen, transanal, rektalen und perinealen Eingriffen entwickelt wurde. Sein Montagerahmen verwendet ein 12" (30 cm) Stativ, zwei horizontale Flex-Arme mit 1" Durchmesser, eine 12" (30 cm) vertikale Verlängerungsstange und zwei 1" x 1" Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch)-Stativkupplungen, was eine flexible Positionierung des Rahmens relativ zum Operationstisch und zur Patientenposition ermöglicht.

Der Arbeitsrahmen kann je nach Zugang aus einem 9½" x 14½" (23.8 x 36.3 cm) segmentierten Perinealring oder einem kleinen Halbkreisring mit 8½" (21.3 cm) Innendurchmesser zusammengebaut werden. Fünf Standard-Kipp-Ratschen mit einstellbarem Neigungswinkel werden am Ring befestigt und ermöglichen es, jede Valve unabhängig voneinander anzuwinkeln und zu spannen.

Das enthaltene Valven-Set deckt ein breites Spektrum an Anforderungen ab: Rektal-Valven in den Größen 7/8" x 37/8" und 7/8" x 27/8", biegsame Valven in den Größen 1" x 3½", ½" x 4" und ¾" x 4" sowie 1" x 3½" Deaver-Valven. Alle Komponenten sind aus nichtmagnetischem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) gefertigt und werden in einem speziellen Sterilisationssieb geliefert.

Das Bookwalter Rectal/Trans-Anal Surgery Retractor System wird unsteril geliefert, ist wiederverwendbar und vollständig autoklavierbar. Das System muss vor dem Gebrauch gemäß den validierten Verfahren der Gesundheitseinrichtung gereinigt und sterilisiert werden. Retractor Maker fertigt das System in Sialkot, Pakistan, und liefert es direkt an Krankenhäuser, Chirurgen und Distributoren.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest