



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Système d'écarteur d'urologie Bookwalter

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

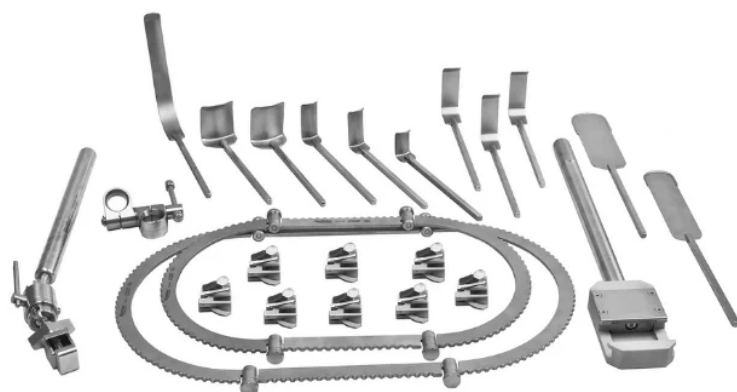

Système d'écarteur d'urologie Bookwalter

SKU RM-BURS-1

\$2,399 USD

LISTE DES COMPOSANTS

QUANTITÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Montant de champ	12" (30.5 cm)
1	Raccord de montant	Standard
1	Barre flexible horizontale	Diamètre 1" (2.5 cm)
8	Mécanismes à crémaillère inclinables	Multi-angles
1	Anneau segmenté	10½" × 19" (26.7 × 48.3 cm)
1	Anneau segmenté	8½" × 14" (21.6 × 35.6 cm)
1	Valve malléable	2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)
1	Valve malléable	1½" × 6" (3.8 × 15.2 cm)
2	Valves Kelly	1" × 2½" (2.5 × 6.4 cm)
1	Valve Kelly	1" × 1½" (2.5 × 3.8 cm)
2	Valves Kelly	2" × 2½" (5.1 × 6.4 cm)
3	Valves vaginales latérales	1" × 3" (2.5 × 7.6 cm)
1	Valve rénale Wylie	1" × 7" (2.5 × 17.8 cm)
1	Coffret de stérilisation	Boîtier de protection

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le système d'écarteur d'urologie Bookwalter est un ensemble d'écarteurs autostatiques montés sur table, conçu pour offrir une exposition stable et mains libres lors des abords abdominaux et des flancs des reins, des uretères, de la vessie et des structures urologiques rétropéritonéales. Le système d'écarteur d'urologie Bookwalter se fixe à la table d'opération à l'aide d'un montant de champ de 12" (30.5 cm), d'un raccord de montant standard et d'une barre flexible horizontale de 1" (2.5 cm) de diamètre.

Deux anneaux segmentés sont fournis — 10½" × 19" (26.7 × 48.3 cm) et 8½" × 14" (21.6 × 35.6 cm) — afin que le cadre puisse être adapté à l'incision et au patient. Huit mécanismes à crémaillère inclinables multi-angles fixent les valves à l'anneau et permettent de régler indépendamment la profondeur de rétraction et l'angle de la valve.

Le matériel de rétraction couvre les expositions profondes et superficielles : valves malléables de 2" × 6" et 1½" × 6", valves Kelly en tailles 1" × 2½", 1" × 1½" et 2" × 2½", trois valves vaginales latérales de 1" × 3" et une valve rénale Wylie de 1" × 7". Tous les composants sont fabriqués en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique).

Le système d'écarteur d'urologie Bookwalter est fourni non stérile, est réutilisable et entièrement autoclavable, et doit être nettoyé et stérilisé selon les procédures validées de votre établissement avant utilisation. Retractor Maker fabrique et fournit l'ensemble directement depuis Sialkot, au Pakistan.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest