



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Sistema Separador Bookwalter para Incisiones Pequeñas

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

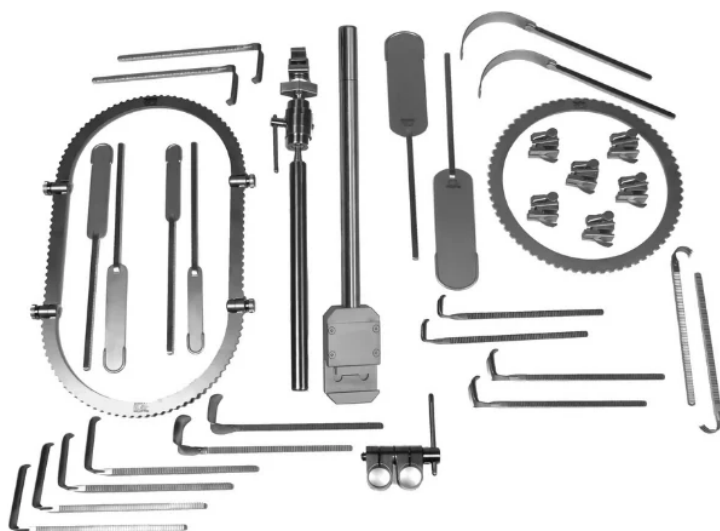

Sistema Separador Bookwalter para Incisiones Pequeñas

SKU RM-BSIRS-1

\$2,199 USD

LISTA DE COMPONENTES

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Poste de Campo	Varilla de soporte vertical de 12" (30 cm)
1	Acoplador de Poste de Acero Inoxidable	Abrazadera de riel de alta resistencia de 1" x 1" (2.5 x 2.5 cm)
1	Barra Flexible Horizontal	Brazo multiarticulado de 1" de diámetro (2.5 cm)
1	Anillo Sólido Redondo Pequeño	Diámetro Interno (ID) de 8½" (21.3 cm)
1	Anillo Segmentado Ovalado Pequeño	Marco articulado reconfigurable de 8½" x 14" (20 x 35 cm)
6	Trinquetes de Inclinación	Bloqueos mecánicos de marco de perfil bajo
2	Valvas Maleables	1" x 3½" (2.5 x 12.5 cm)
2	Valvas Maleables	¾" x 4" (1.9 x 10 cm)
2	Valvas Maleables	2" x 6" (5 x 15 cm)
2	Valvas Deaver	Valvas pélvicas curvas de 1" x 3½" (2.5 x 8.8 cm)
2	Valvas Kelly	Valvas de ángulo recto poco profundas de 2" x 1½" (5 x 3.8 cm)
2	Valvas Kelly	Valvas de ángulo recto de 1" x 2½" (2.5 x 6.3 cm)
2	Valvas Kelly	Valvas de ángulo recto de 1" x 3" (2.5 x 7.5 cm)

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
2	Valvas de Rastrillo Profundo	Garras de múltiples dientes de $\frac{3}{4}$ " de profundidad $\times$ $\frac{2}{3}$ " de ancho (1.9 $\times$ 1.7 cm)
2	Valvas Richardson	Valvas de labio plano poco profundo de $\frac{3}{4}$ " $\times$ 2" (1.9 $\times$ 5 cm)
2	Valvas Richardson	Valvas de labio plano poco profundo de 1" $\times$ 1 $\frac{1}{4}$ " (2.5 $\times$ 3.1 cm)
2	Valvas Richardson	Valvas de labio plano poco profundo de $\frac{3}{4}$ " $\times$ 1" (1.9 $\times$ 2.5 cm)
1	Caja de Esterilización	Contenedor organizador perforado personalizado

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Sistema Separador Bookwalter para Incisiones Pequeñas es un sistema de separación autoestático montado en la mesa de operaciones. Se ancla a la mesa quirúrgica y sujeta cada valva en su posición, proporcionando una exposición quirúrgica estable y manos libres durante procedimientos realizados a través de incisiones limitadas donde se requiere un acceso preciso minimizando la disrupción del tejido.

El sistema de montaje comprende un poste de campo de 12" (30 cm), una abrazadera de riel de acoplador de poste de Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) (2.5 $\times$ 2.5 cm) y una barra flexible horizontal multiarticulada de 1" (2.5 cm) de diámetro. Se suministran dos opciones de anillos: un anillo sólido redondo pequeño con un diámetro interno de 8 $\frac{1}{2}$ " (21.3 cm) y un anillo segmentado ovalado pequeño que mide 8 $\frac{1}{2}$ " $\times$ 14" (20 $\times$ 35 cm), el cual está articulado para que el marco pueda reconfigurarse alrededor de la incisión.

Seis trinquetes de inclinación de perfil bajo se bloquean al anillo y sujetan cada valva a la profundidad y ángulo requeridos. El juego de valvas incluye valvas maleables en tres tamaños, valvas pélvicas Deaver curvas, valvas Kelly de ángulo recto poco profundas en tres tamaños, valvas de rastrillo profundo de múltiples dientes y valvas Richardson de labio plano poco profundo en tres tamaños, lo que permite ampliar la exposición progresivamente a través de una apertura pequeña.

Todos los componentes están fabricados en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético). El Sistema Separador Bookwalter para Incisiones Pequeñas es completamente nuevo, reutilizable y totalmente autoclavable, y se suministra en estado no estéril; la limpieza y esterilización deben seguir los procedimientos validados del centro sanitario antes de su uso. El Sistema Separador Bookwalter para Incisiones Pequeñas se suministra en una caja de esterilización perforada personalizada que organiza cada componente para su procesamiento y almacenamiento. Retractor Maker fabrica el sistema en Sialkot, Pakistán, y lo suministra directamente a hospitales, cirujanos y distribuidores, con una cantidad mínima de pedido de un juego completo.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest