



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Sistema de Afastador de Urologia Bookwalter

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

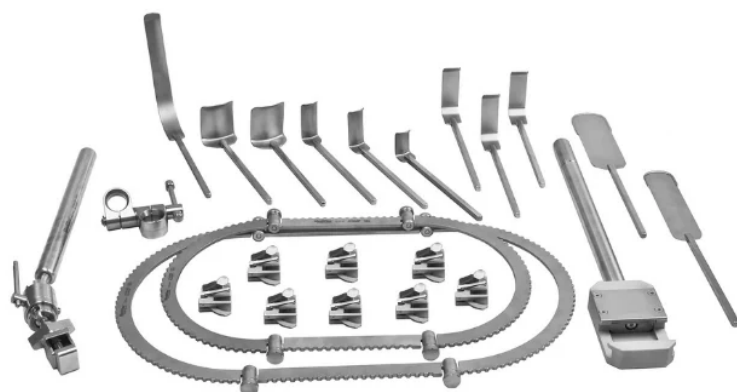

Sistema de Afastador de Urologia Bookwalter

SKU RM-BURS-1

\$2,399 USD

LISTA DE COMPONENTES

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
1	Poste de Campo	12" (30.5 cm)
1	Acoplador de Poste	Padrão
1	Barra Flexível Horizontal	Diâmetro de 1" (2.5 cm)
8	Mecanismos de Catraca Basculante	Multiangulares
1	Anel Segmentado	10½" × 19" (26.7 × 48.3 cm)
1	Anel Segmentado	8½" × 14" (21.6 × 35.6 cm)
1	Lâmina Maleável	2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)
1	Lâmina Maleável	1½" × 6" (3.8 × 15.2 cm)
2	Lâminas Kelly	1" × 2½" (2.5 × 6.4 cm)
1	Lâmina Kelly	1" × 1½" (2.5 × 3.8 cm)
2	Lâminas Kelly	2" × 2½" (5.1 × 6.4 cm)
3	Lâminas Vaginais Laterais	1" × 3" (2.5 × 7.6 cm)
1	Lâmina Wylie Renal	1" × 7" (2.5 × 17.8 cm)
1	Caixa de Esterilização	Estojo Protetor

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Sistema de Afastador de Urologia Bookwalter é um conjunto de afastamento cirúrgico autoestático montado na mesa, projetado para fornecer exposição estável e livre das mãos durante acessos abdominais e de flanco aos rins, ureteres, bexiga e estruturas urológicas retroperitoneais. O Sistema de Afastador de Urologia Bookwalter é fixado à mesa de operação com um poste de campo de 12" (30.5 cm), um acoplador de poste padrão e uma barra flexível horizontal de 1" (2.5 cm) de diâmetro.

Dois anéis segmentados são fornecidos — 10½" × 19" (26.7 × 48.3 cm) e 8½" × 14" (21.6 × 35.6 cm) — permitindo que a armação seja adaptada à incisão e ao paciente. Oito mecanismos de catraca basculante multiangulares fixam as lâminas ao anel e permitem que a profundidade de afastamento e o ângulo da lâmina sejam ajustados de forma independente.

Os acessórios de afastamento abrangem exposições profundas e superficiais: lâminas maleáveis de 2" × 6" e 1½" × 6", lâminas Kelly nos tamanhos 1" × 2½", 1" × 1½" e 2" × 2½", três lâminas vaginais laterais de 1" × 3" e uma lâmina Wylie renal de 1" × 7". Todos os componentes são fabricados em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) não magnético e fornecidos em uma caixa de esterilização.

O Sistema de Afastador de Urologia Bookwalter é fornecido não estéril, é reutilizável e totalmente autoclavável, devendo ser limpo e esterilizado de acordo com os procedimentos validados de sua instituição antes do uso. A Retractor Maker fabrica e fornece o conjunto diretamente de Sialkot, Paquistão.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest