



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Реактор Greenberg

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

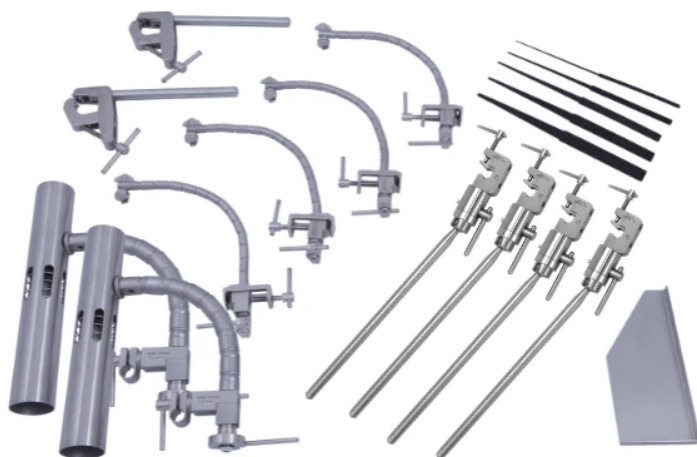

Пeактоp Greenberg

SKU RM-GR-1

\$3,999 USD

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
2	Первичные штанги	6" (15 cm) — крепятся непосредственно к стойкам жесткого фиксатора черепа
4	Плавающие вторичные штанги	12" (30 cm) — расширяют внешний периметр поддержки вокруг краниотомии
4	Длинные гибкие рычаги ретрактора	9.5" (24 cm) — многошарнирные фрикционные рычаги для позиционирования лопаток
2	Подставки для рук	10" (25 cm) — обеспечивают физическую опору предплечий для снижения усталости хирурга
1	Конусная лопатка ретрактора	от ¼" до ¾" (6 mm до 19 mm) — экстраширокая лопатка для обширной кортикальной ретракции
1	Конусная лопатка ретрактора	от 5/32" до 5/8" (4 mm до 16 mm) — лопатка средней ширины для лобарного и субтемпорального доступа
1	Конусная лопатка ретрактора	от ¼" до ½" (3 mm до 12.5 mm) — стандартная лопатка для глубоких межполушарных коридоров
1	Конусная лопатка ретрактора	от 3/32" до 3/8" (2.4 mm до 9 mm) — тонкая конусная лопатка для узких путей в основании черепа
1	Конусная лопатка ретрактора	от 1/16" до ¼" (1.5 mm до 6 mm) — микролопатка для деликатной ретракции нервов и сосудов

КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Алюминиевый лоток для салфеток (патти)	3" × 6¾" (7.5 cm × 16.8 cm) — устанавливается на раму для организации нейрохирургических салфеток
1	Стерилизационный лоток	17" × 10" × 2½" (43 cm × 25 cm × 6.3 cm) — высокопрочный перфорированный лоток-органайзер

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ретрактор Greenberg — это комплексная нейрохирургическая система, признанная во всем мире за обеспечение непревзойденной модульной экспозиции и стабилизации «без рук» при глубоких внутричерепных вмешательствах. Жестко фиксируясь на стойках черепного фиксатора, этот многоуровневый каркас создает индивидуальный трехмерный рабочий периметр непосредственно вокруг края краниотомии.

Разработанная для обеспечения максимальной микрохирургической точности, полная система Greenberg Retractor включает две 6-дюймовые первичные штанги, четыре 12-дюймовые плавающие вторичные штанги, четыре 9.5-дюймовых артикуляционных гибких рычага и две 10-дюймовые эргономичные подставки для рук, стабилизирующие предплечья хирурга. Система оснащена пятью двусторонними пластичными конусными лопатками (от микролопаток 1.5 mm до широких кортикальных лопаток 19 mm) и встроенным алюминиевым лотком для салфеток (патти), устанавливаемым на раму.

Изготовленный из немагнитной хирургической нержавеющей стали с антибликовым сатинированным покрытием, Retractor Maker поставяет ретрактор Greenberg в нестерильном виде. Система полностью автоклавируема и поставяется в специальном перфорированном стерилизационном лотке-органайзере размером 17" × 10" × 2½", что гарантирует полную уверенность при выполнении сложных краниальных операций.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest