



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Système d'écarteur Bookwalter Small Incision

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron

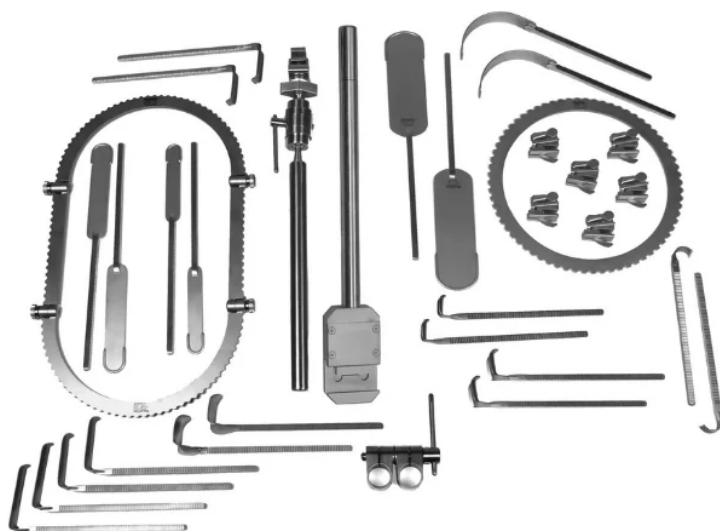

Système d'écarteur Bookwalter Small Incision

SKU RM-BSIRS-1

\$2,199 USD

Liste des composants

Quantité	Composant	Dimensions / Description
1	Montant de champ	Tige de support verticale de 12" (30 cm)
1	Raccord de montant en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique)	Étau de rail robuste de 1" x 1" (2,5 x 2,5 cm)
1	Barre flexible horizontale	Bras articulé de 1" de diamètre (2,5 cm)
1	Petit anneau plein rond	Diamètre interne (DI) de 8½" (21,3 cm)
1	Petit anneau segmenté ovale	Cadre articulé reconfigurable de 8½" x 14" (20 x 35 cm)
6	Crémaillères inclinables	Verrous mécaniques de cadre à profil bas
2	Lames malléables	1" x 3½" (2,5 x 12,5 cm)
2	Lames malléables	¾" x 4" (1,9 x 10 cm)
2	Lames malléables	2" x 6" (5 x 15 cm)
2	Lames Deaver	Lames pelviennes courbes 1" x 3½" (2,5 x 8,8 cm)
2	Lames Kelly	Lames à angle droit peu profondes 2" x 1½" (5 x 3,8 cm)
2	Lames Kelly	Lames à angle droit 1" x 2½" (2,5 x 6,3 cm)

QUANTITÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
2	Lames Kelly	Lames à angle droit 1" × 3" (2,5 × 7,5 cm)
2	Lames à griffes profondes	Griffes multi-dents ¾" de profondeur × ⅔" de large (1,9 × 1,7 cm)
2	Lames Richardson	Lames à bord plat peu profondes ¾" × 2" (1,9 × 5 cm)
2	Lames Richardson	Lames à bord plat peu profondes 1" × 1¼" (2,5 × 3,1 cm)
2	Lames Richardson	Lames à bord plat peu profondes ¾" × 1" (1,9 × 2,5 cm)
1	Boîte de stérilisation	Conteneur organisateur perforé personnalisé

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le système d'écarteur Bookwalter Small Incision est un système d'écartement autostatique fixé à la table opératoire. Il s'ancre à la table et maintient chaque lame en position, offrant une exposition chirurgicale stable et mains libres lors de procédures effectuées par des incisions limitées où un accès précis est requis tout en minimisant la perturbation des tissus.

Le système de montage comprend un montant de champ de 12" (30 cm), un étau de rail robuste en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) de 1" × 1" (2,5 × 2,5 cm) et une barre flexible horizontale articulée de 1" (2,5 cm) de diamètre. Deux options d'anneaux sont fournies : un petit anneau plein rond d'un diamètre interne de 8½" (21,3 cm) et un petit anneau segmenté ovale mesurant 8½" × 14" (20 × 35 cm), articulé pour permettre de reconfigurer le cadre autour de l'incision.

Six crémaillères inclinables à profil bas se verrouillent sur l'anneau et maintiennent chaque lame à la profondeur et à l'angle requis. Le jeu de lames comprend des lames malléables en trois tailles, des lames pelviennes courbes Deaver, des lames Kelly à angle droit peu profondes en trois tailles, des lames à griffes profondes à plusieurs dents et des lames Richardson à bord plat peu profondes en trois tailles, permettant une exposition progressive à travers une petite ouverture.

Tous les composants sont fabriqués en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique). Le système d'écarteur Bookwalter Small Incision est neuf, réutilisable et entièrement autoclavable. Il est livré non stérile — le nettoyage et la stérilisation doivent suivre les procédures validées de l'établissement de santé avant utilisation. Le système est livré dans une boîte de stérilisation perforée personnalisée qui organise chaque composant pour le traitement et le stockage. Retractor Maker fabrique le système à Sialkot, au Pakistan, et le fournit directement aux hôpitaux, chirurgiens et distributeurs, avec une quantité minimale de commande d'un ensemble complet.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest