



FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador para Mini-esternotomía McCarthy con
Elevador Universal

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021

✓ ISO 9001:2015


✓ EN ISO 7153-1:2016

✓ cGMP Approved

✓ SCCI Registered since 2023

✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

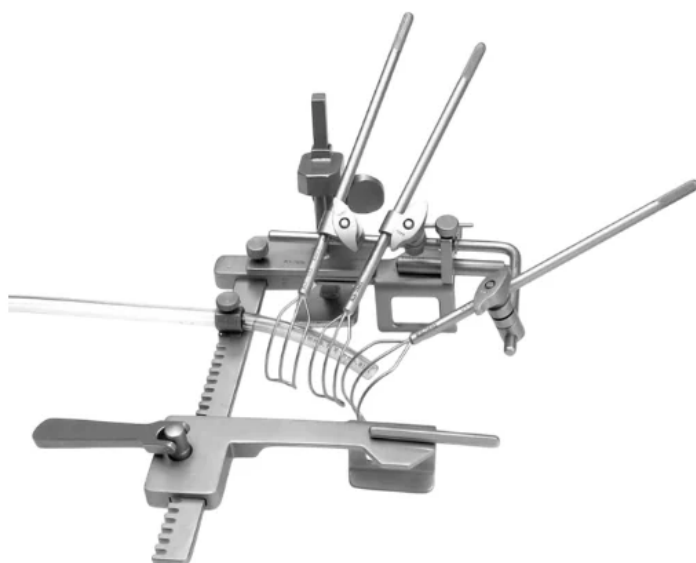

Separador para Mini-esternotom ía McCarthy con Elevador Universal

SKU RM-MMSR-1

\$699 USD

LISTA DE COMPONENTES

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Barras dobles del separador torácico	Marco de separación primario modificado de 5 pulgadas para separación esternal
1	Abrazadera universal dividida	Abrazadera de montaje especializada para asegurar accesorios del marco
1	Abrazadera universal	Bloque de sujeción multiusos para la integración de componentes
1	Soporte principal	Soporte de montaje primario para sostener los brazos auxiliares del retractor
1	Soporte para tubos	Asegura los tubos quirúrgicos dentro de la disposición del campo operatorio
1	Barra transversal en ángulo recto	Barra transversal estructural para el posicionamiento de elementos auxiliares del retractor
1	Retractor de cesta de alambre grande (Maleable)	Cesta de alambre maleable ancha para el desplazamiento suave de tejidos
2	Retractor de cesta de alambre pequeño (Maleable)	Cestas de alambre maleable compactas para retracción de tejido focalizada

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador para Mini-esternotomía McCarthy con Elevador Universal es un sistema de retracción cardíaca avanzado diseñado específicamente para procedimientos valvulares y aórticos mínimamente invasivos donde se requiere un trauma quirúrgico mínimo. Al combinar una separación esternal lateral confiable con capacidades de elevación vertical independiente, este sistema eleva el margen esternal izquierdo para proporcionar una alineación visual directa con la aurícula y las válvulas cardíacas.

Diseñado para un posicionamiento torácico de precisión, el Separador para Mini-esternotomía McCarthy con Elevador Universal cuenta con un marco separador torácico de doble barra modificado de 5 pulgadas, un conjunto de elevador universal extraíble integrado, una abrazadera universal dividida, una abrazadera universal estándar, un soporte principal y una barra transversal auxiliar en ángulo recto. El sistema está equipado con un soporte para tubos de succión/irrigación y tres retractores de cesta de alambre maleables (uno grande y dos pequeños) que se adaptan a los márgenes del tejido cardíaco sin causar trauma focal.

Fabricado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico con un acabado satinado no reflectante, Retractor Maker suministra el Separador para Mini-esternotomía McCarthy con Elevador Universal no estéril y totalmente autoclavable dentro de un contenedor de almacenamiento protector de alta resistencia, ofreciendo durabilidad quirúrgica y un rendimiento confiable en el quirófano.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest