



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Bookwalter 手術用開創器システム（手外科用）

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023

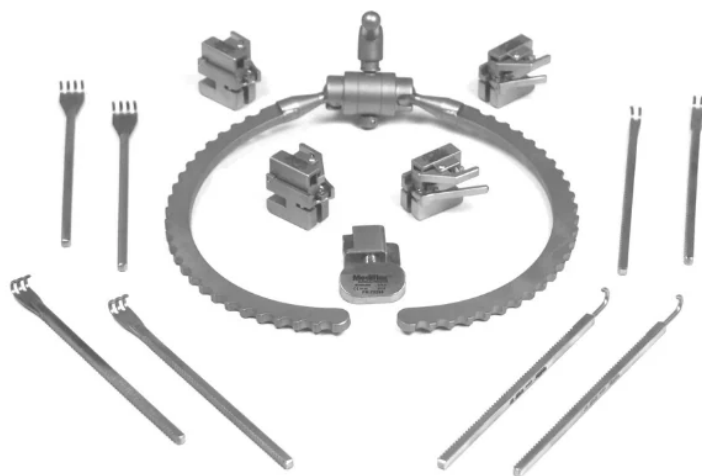


SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Bookwalter 手術用 開創器システム（手 外科用）

SKU RM-BHSRS-1

\$999 USD


コンポーネントリスト

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
2	ミニ Bookwalter ブレード、シングルフック	標準ミニ — 鋭型または鈍型
2	ミニ Bookwalter ブレード、ダブルフック	標準ミニ — 鋭型または鈍型
2	ミニ Bookwalter ブレード、トリプルフック	標準ミニ — 鋭型または鈍型
2	ミニ Bookwalter ブレード、クアッドフック	標準ミニ — 鋭型または鈍型
1	ミニ Bookwalter ツイストラチェット	標準ミニ
4	ミニ Bookwalter チルトラチェット機構	標準ミニ
1	ミニ Bookwalter スプリットリング	7" (17.5 cm)
1	滅菌ボックス	保護ケース

製品詳細

Bookwalter 手外科用開創器システムは、手部、手関節、および上肢の繊細な外科手術中に、安定したハンズフリーの開創を提供するために設計されたコンパクトな自動開創システムです。このセットは、術野のワーキングフレームとなる 7" (17.5 cm) ミニ Bookwalter スプリットリングを中心に構成されています。

4つのミニチルトラチェット機構と1つのミニツイストラチェットが付属のブレードをスプリットリングに固定し、各ブレードの角度と張力を独立して調整できます。本システムには、鋭型または鈍型チップから選択可能なシングル、ダブル、トリプル、クアッドフックのミニ Bookwalter ブレードが含まれており、必要な術野露出に合わせてブレード構成を選択できます。テーブル固定用の StrongArm ホルダーは別売りです。

すべてのコンポーネントは非磁性サージカルグレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）で製造されており、整理された保管と処理のための専用滅菌ボックスが付属しています。システムは再利用可能で、完全なオートクレーブに対応しています。

Bookwalter 手外科用開創器システムは未滅菌の状態を提供されます。使用前に、医療施設の検証済み手順に従って洗浄および滅菌を行ってください。パキスタンのシアルコートに拠点を置く Retractor Maker は、このシステムを製造し、病院、外科医、および販売代理店に直接供給しています。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest