



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Sistema de Afastador Cirúrgico de Mão Bookwalter

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron

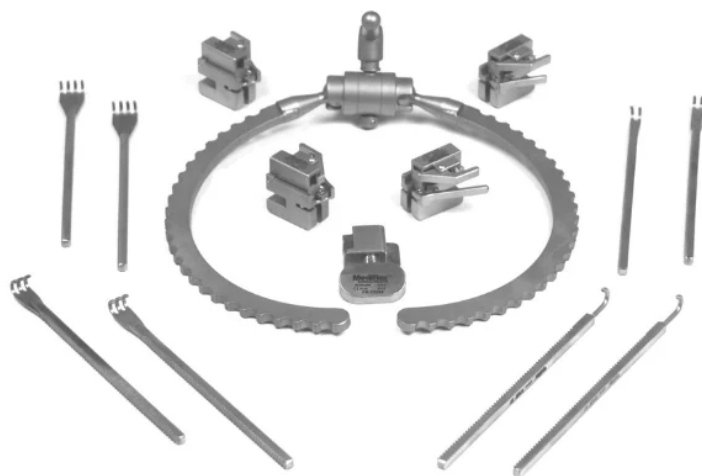

Sistema de Afastador Cirúrgico de Mão Bookwalter

SKU RM-BHSRS-1

\$999 USD

LISTA DE COMPONENTES

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
2	Lâmina Mini-Bookwalter, Gancho Simples	Padrão Mini — ponta aguda ou romba
2	Lâmina Mini-Bookwalter, Gancho Duplo	Padrão Mini — ponta aguda ou romba
2	Lâmina Mini-Bookwalter, Gancho Triplo	Padrão Mini — ponta aguda ou romba
2	Lâmina Mini-Bookwalter, Gancho Quádruplo	Padrão Mini — ponta aguda ou romba
1	Cremalheira Twist Mini-Bookwalter	Padrão Mini
4	Mecanismo de Cremalheira Tilt Mini-Bookwalter	Padrão Mini
1	Anel Bipartido Mini-Bookwalter	7" (17.5 cm)
1	Caixa de Esterilização	Estojo Protetor

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Sistema de Afastador Cirúrgico de Mão Bookwalter é um sistema autostático compacto projetado para fornecer retração estável e mãos livres durante procedimentos cirúrgicos delicados de mão, punho e extremidades superiores. O conjunto é construído em torno de um anel bipartido Mini-Bookwalter de 7" (17.5 cm), que forma a estrutura de trabalho ao redor do campo operatório.

Quatro mecanismos de cremalheira mini tilt e uma cremalheira mini twist fixam as lâminas incluídas ao anel bipartido, permitindo que o ângulo e a tensão de cada lâmina sejam ajustados de forma independente. O Sistema de Afastador Cirúrgico de Mão Bookwalter inclui lâminas Mini-Bookwalter de gancho simples, gancho duplo, gancho triplo e gancho quádruplo, disponíveis com pontas agudas ou rombas, para que a configuração das lâminas possa ser selecionada conforme a exposição necessária. Um Suporte StrongArm está disponível separadamente para montagem em mesa.

Todos os componentes são fabricados em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico não magnético e são fornecidos em uma caixa de esterilização dedicada para armazenamento e processamento organizados. O sistema é reutilizável e totalmente autoclavável.

O Sistema de Afastador Cirúrgico de Mão Bookwalter é fornecido não estéril. Deve ser limpo e esterilizado de acordo com os procedimentos validados da unidade de saúde antes do uso. A Retractor Maker, com sede em Sialkot, Paquistão, fabrica e fornece este sistema diretamente para hospitais, cirurgiões e distribuidores.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest