



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur Sternal French Pattern I.M.A

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

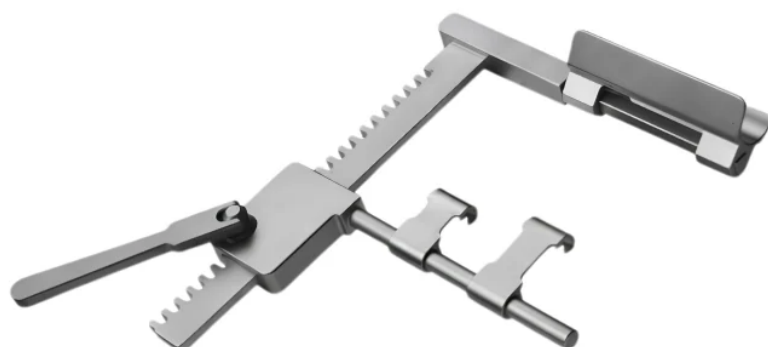

Écarteur Sternal French Pattern I.M.A

SKU RM-FPIMASR-429-1

\$429 USD

Liste des composants

Quantité	Composant	Dimensions / Description
1	Rail de guidage coulissant principal	Châssis latéral conçu pour guider et écarter les structures thoraciques
1	Composant de lame sternale large	Palette plate lisse de 100 mm x 20 mm pour la répartition de la force sternale
2	Lames à griffes sternales asymétriques	Crochets de traction incurvés doubles conçus avec des profondeurs de griffe de 28 mm ou 32 mm
3	Verrous à vis de lame de tension dédiés	Mécanismes de verrouillage indépendants conçus pour maintenir chaque lame en place
2	Bras de pinces écarteurs ergonomiques	Bras de manipulation légers et profilés avec des périmètres extérieurs lisses
1	Boîte / Stockage de protection	Emballage de transport standard

Description du produit

L'écarteur sternal French Pattern I.M.A est un système d'écartement chirurgical cardiothoracique de premier plan, conçu spécifiquement pour assurer l'élévation sternale unilatérale et un accès opératoire étendu lors du prélèvement de l'artère mammaire interne (IMA / LIMA) dans le cadre d'un pontage aortocoronarien. Conçu avec un châssis multi-lames asymétrique, cet instrument permet aux chirurgiens de soulever une marge sternale tout en appliquant une contre-traction stabilisatrice sur le côté opposé, créant ainsi un couloir visuel clair le long du lit vasculaire thoracique interne.

Construit selon les spécifications cliniques, cet ensemble complet d'écarteur sternal French Pattern I.M.A (\$429) comprend un rail de guidage coulissant principal robuste avec des bras de pinces écarteurs ergonomiques forgés avec des périmètres extérieurs lisses. Fabriqué à la main à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), l'empreinte de la lame sternale large primaire mesure 100 mm × 20 mm (20 mm de large × 100 mm de long) pour répartir uniformément les forces de levage contre le sternum. Le système comprend deux lames de griffes sternales asymétriques avec des variations de profondeur modulaires configurées à 28 mm ou 32 mm, chacune maintenue solidement par des verrous à vis de lame de tension dédiés pour assurer une stabilité inébranlable.

Forgé avec une finition mate satinée antireflet, Retractor Maker produit l'écarteur sternal French Pattern I.M.A pour résister aux cycles répétitifs d'autoclave hospitaliers, offrant aux salles de chirurgie à cœur ouvert, aux centres cardiaques et aux blocs opératoires thoraciques du monde entier une stabilité mécanique exceptionnelle, une résistance à la corrosion et une durabilité totale en autoclave.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest