



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Bookwalter StrongArm Temel Genel Ekartör Sistemi

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

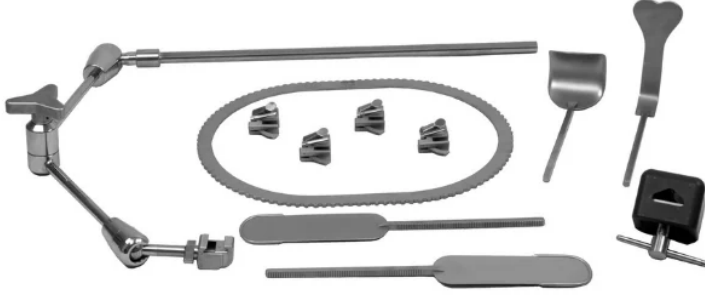

Bookwalter StrongArm Temel Genel Ekartör Sistemi

SKU RM-BSABGRS-1

\$1,499 USD

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Üstten Monteli StrongArm PLUS Tutucu	Yüksekliği Ayarlanabilir / Artiküle
1	Oval Halka, Orta	10½" × 14½" (26.7 × 36.8 cm)
1	Ağır Hizmet Tipi Ray Klempi	Ameliyat Masası Rayı ile Uyumlu
4	Tilt Cırcır Mekanizması	Çok Açılı
1	Balfour Bleyd	2⅝" × 3" (6.7 × 7.6 cm)
1	Harrington Bleyd	1" × 5⅝" × 2½" (2.5 × 14.3 × 6.4 cm)
2	Dövuilebilir Bleydler	2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)
1	Sterilizasyon Kutusu	Koruyucu Taşıma Kutusu

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Bookwalter StrongArm Temel Genel Ekartör Sistemi, StrongArm PLUS Tutucu ve Konumlandırıcı üzerine monte edilmiş self-retaining bir ekartör sistemidir. Tutucu ameliyat masasına takılır ve ekartör çerçevesini yerinde tutarak açık genel cerrahi prosedürleri sırasında stabil, eller serbest cerrahi görüş alanı sağlar.

Montaj sistemi, masa rayıyla uyumlu ağır hizmet tipi bir ray klempi ile birlikte yüksekliği ayarlanabilir, artiküle üstten monteli StrongArm PLUS Tutucudan oluşur. Tutucu, 10½" × 14½" (26.7 × 36.8 cm) ölçülerindeki orta boy oval halkayı taşır; bu halka insizyonun üzerine konumlandırılır ve gereken çalışma yüksekliği ile açısında kilitlenir.

Dört adet çok açılı tilt circır mekanizması halkaya kenetlenir ve her bir bleydi seçilen derinlik ve eğimde tutar. Temel bleyd içeriği; bir adet 2 $\frac{5}{8}$ " x 3" (6.7 x 7.6 cm) Balfour bleyd, bir adet 1" x 5 $\frac{5}{8}$ " x 2 $\frac{1}{2}$ " (2.5 x 14.3 x 6.4 cm) Harrington bleyd ve iki adet 2" x 6" (5.1 x 15.2 cm) dövülebilir bleyd cerrahi spatuladan oluşur.

Tüm bileşenler manyetik olmayan, cerrahi sınıf Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten üretilmiştir. Bookwalter StrongArm Temel Genel Ekartör Sistemi yepyeni, yeniden kullanılabilir ve tamamen otoklavlanabilir özelliktedir; steril olmayan şekilde tedarik edilir ve kullanımdan önce sağlık kuruluşunun doğrulanmış prosedürlerine uygun olarak temizlenmeli ve sterilize edilmelidir. Bookwalter StrongArm Temel Genel Ekartör Sistemi, bileşenleri koruyan ve düzenleyen bir sterilizasyon kutusu içinde sunulur. Retractor Maker sistemi Sialkot, Pakistan'da üretmekte ve hastanelere, cerrahlara ve distribütörlere minimum bir tam set sipariş miktarıyla doğrudan tedarik etmektedir.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest