



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Урологическая ранорасширительная система
Bookwalter

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021

✓ ISO 9001:2015

✓ EN ISO 7153-1:2016


✓ cGMP Approved

✓ SCCI Registered since 2023

✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron

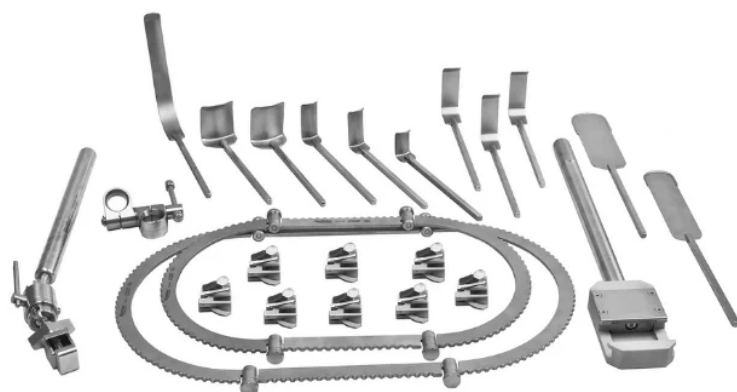

Урологическая ранорасширите льная система Bookwalter

SKU RM-BURS-1

\$2,399 USD

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Вертикальная стойка	12" (30.5 cm)
1	Муфта стойки	Стандартная
1	Горизонтальная гибкая штанга	Диаметр 1" (2.5 cm)
8	Наклонные храповые механизмы	Многопозиционные
1	Сегментированное кольцо	10½" × 19" (26.7 × 48.3 cm)
1	Сегментированное кольцо	8½" × 14" (21.6 × 35.6 cm)
1	Гибкое зеркало	2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)
1	Гибкое зеркало	1½" × 6" (3.8 × 15.2 cm)
2	Зеркала Kelly	1" × 2½" (2.5 × 6.4 cm)
1	Зеркало Kelly	1" × 1½" (2.5 × 3.8 cm)
2	Зеркала Kelly	2" × 2½" (5.1 × 6.4 cm)
3	Вагинальные латеральные зеркала	1" × 3" (2.5 × 7.6 cm)
1	Почечное зеркало Wylie	1" × 7" (2.5 × 17.8 cm)
1	Стерилизационный бокс	Защитный кейс

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Урологическая ранорасширительная система Bookwalter Urology Retractor System — это устанавливаемый на стол самодержащийся комплект, предназначенный для обеспечения стабильной фиксации тканей без участия рук при абдоминальных и фланговых доступах к почкам, мочеточникам, мочевому пузырю и забрюшинным урологическим структурам. Система Bookwalter Urology Retractor System крепится к операционному столу с помощью стойки 12" (30.5 cm), стандартной муфты и горизонтальной гибкой штанги диаметром 1" (2.5 cm).

В комплект поставки входят два сегментированных кольца — 10½" × 19" (26.7 × 48.3 cm) и 8½" × 14" (21.6 × 35.6 cm), что позволяет подобрать раму в соответствии с разрезом и телосложением пациента. Восемь многопозиционных наклонных храповых механизмов надежно фиксируют зеркала на кольце и позволяют независимо устанавливать глубину ретракции и угол наклона лопатки.

Набор инструментов охватывает глубокие и поверхностные доступы: гибкие зеркала 2" × 6" и 1½" × 6", зеркала Kelly размеров 1" × 2½", 1" × 1½" и 2" × 2½", три вагинальных латеральных зеркала 1" × 3" и почечное зеркало Wylie 1" × 7". Все компоненты изготовлены из немагнитной хирургической нержавеющей стали и поставляются в стерилизационном боксе.

Система Bookwalter Urology Retractor System поставляется нестерильной, является многоразовой и полностью автоклавируемой; перед использованием ее необходимо очистить и стерилизовать в соответствии с утвержденными протоколами вашего учреждения. Компания Retractor Maker производит и поставляет комплект напрямую из Сиалкота, Пакистан.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest