



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Bookwalter Handchirurgie-Reetraktorsystem

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

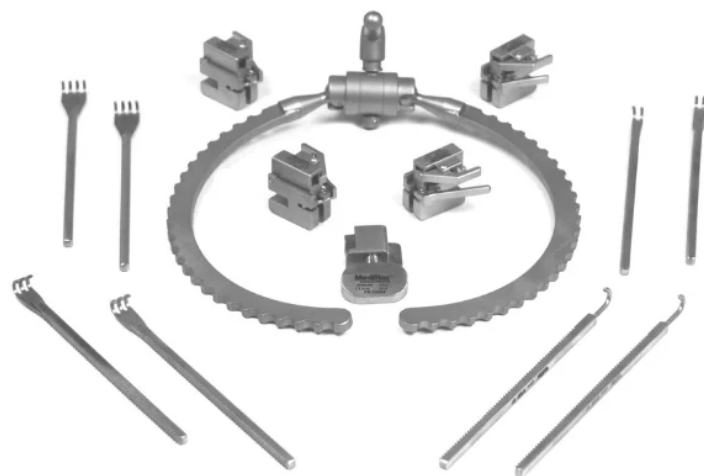

Bookwalter Handchirurgie-Retraktorsystem

SKU RM-BHSRS-1

\$999 USD

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
2	Mini-Bookwalter Valve, Einfachhaken	Standard Mini — scharfe oder stumpfe Spitze
2	Mini-Bookwalter Valve, Doppelhaken	Standard Mini — scharfe oder stumpfe Spitze
2	Mini-Bookwalter Valve, Dreifachhaken	Standard Mini — scharfe oder stumpfe Spitze
2	Mini-Bookwalter Valve, Vierfachhaken	Standard Mini — scharfe oder stumpfe Spitze
1	Mini-Bookwalter Drehschraubratsche	Standard Mini
4	Mini-Bookwalter Kippratschenmechanismus	Standard Mini
1	Mini-Bookwalter Spreizring	7" (17,5 cm)
1	Sterilisationscontainer	Schutzgehäuse

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Bookwalter Handchirurgie-Retraktorsystem ist ein kompaktes, selbsthaltendes Retraktorsystem, das für eine stabile, freihändige Exposition bei anspruchsvollen Eingriffen an Hand, Handgelenk und den oberen Extremitäten entwickelt wurde. Das Set basiert auf einem 7" (17,5 cm) Mini-Bookwalter Spreizring, der den Arbeitsrahmen um das Operationsfeld bildet.

Vier Mini-Kippratschenmechanismen und eine Mini-Drehschraubratsche sichern die enthaltenen Valven am Spreizring und ermöglichen eine unabhängige Einstellung von Winkel und Spannung jeder Valve. Das Bookwalter Handchirurgie-Retraktorsystem umfasst Mini-Bookwalter Valven als Einzel-, Doppel-, Dreifach- und

Vierfachhaken, wahlweise mit scharfen oder stumpfen Spitzen, sodass die Konfiguration optimal an die erforderliche Exposition angepasst werden kann. Ein StrongArm-Halter zur Tischmontage ist separat erhältlich.

Alle Komponenten sind aus nichtmagnetischem, rostfreiem Chirurgenstahl gefertigt und werden in einem speziellen Sterilisationscontainer für eine organisierte Lagerung und Aufbereitung geliefert. Das System ist wiederverwendbar und vollständig autoklavierbar.

Das Bookwalter Handchirurgie-Retraktorsystem wird unsteril geliefert. Vor dem Gebrauch muss es gemäß den validierten Verfahren der Einrichtung gereinigt und sterilisiert werden. Retractor Maker mit Sitz in Sialkot, Pakistan, fertigt und liefert dieses System direkt an Krankenhäuser, Chirurgen und Distributoren.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest