



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Bookwalter Retractor (Standard)

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

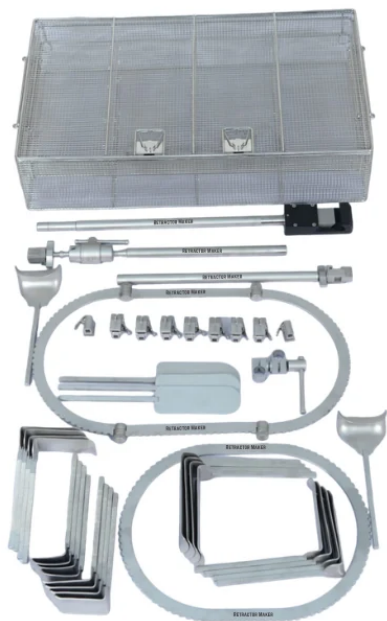

Afastador Bookwalter Retractor (Standard)

SKU RM-SBR-1

\$2,499 USD

LISTA DE COMPONENTES

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
1	Poste de Campo Bookwalter	12" (30.5 cm)
1	Barra Horizontal Bookwalter	Standard
1	Acoplador de Poste Bookwalter	Serviço Pesado
1	Barra Flexível Horizontal Bookwalter	1" de Diâmetro (2.5 cm)
2	Catracas Standard Bookwalter	Sem Inclinação
7	Mecanismos de Catraca Basculante Bookwalter	Multi-ângulo
1	Anel Oval Médio	10½" x 14½" (26.7 x 36.8 cm)
1	Anel Segmentado Médio	10½" x 19" (26.7 x 48.3 cm)
2	Válvulas Balfour	2⅝" x 3" (6.7 x 7.6 cm)
4	Válvulas Kelly	2" x 3" (5.1 x 7.6 cm)
4	Válvulas Kelly	2" x 4" (5.1 x 10.2 cm)
4	Válvulas Kelly	2" x 5" (5.1 x 12.7 cm)
4	Válvulas Kelly	2" x 6" (5.1 x 15.2 cm)

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
4	Válvulas Kelly	2" x 7" (5.1 x 17.8 cm)
1	Válvula Maleável	3" x 6" (7.6 x 15.2 cm)
2	Válvulas Maleáveis	2" x 6" (5.1 x 15.2 cm)
1	Caixa de Esterilização	Estojo Organizador Perfurado

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Sistema Afastador Bookwalter Retractor – Standard é um afastador autoestático montado na mesa projetado para fornecer exposição estável e mãos-livres durante procedimentos abdominais abertos de grande porte. Sua estrutura modular combina um poste de campo, componentes de suporte horizontal, anéis retratores e mecanismos de catraca ajustáveis para fixar válvulas selecionadas ao redor do campo cirúrgico.

A configuração Standard inclui um anel oval médio, um anel segmentado médio, mecanismos de catraca padrão e basculantes, além de uma seleção de válvulas Balfour, Kelly e maleáveis. O Bookwalter Retractor é fornecido em uma caixa de esterilização perfurada dedicada para armazenamento e processamento organizados.

O Bookwalter Retractor é fornecido não estéril e foi projetado para ser limpo e esterilizado antes do uso, de acordo com os procedimentos validados da unidade de saúde.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest