



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Bookwalter Urology Retractor System

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

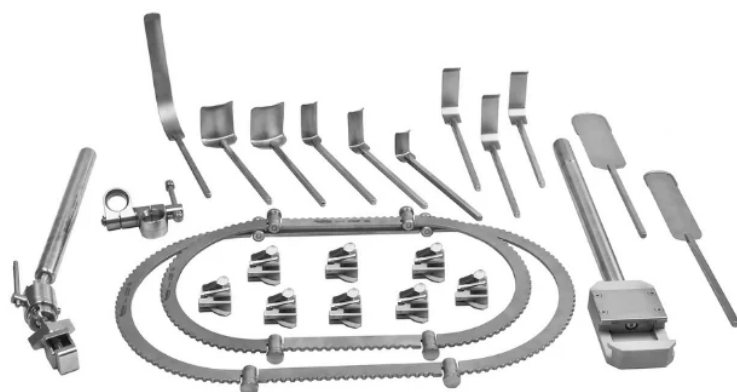

Bookwalter Urology Retractor System

SKU RM-BURS-1

\$2,399 USD

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Stativstab	12" (30.5 cm)
1	Stabkupplung	Standard
1	Horizontaler Flexarm	1" Durchmesser (2.5 cm)
8	Neigbare Ratschenmechanismen	Mehrwinkel
1	Segmentierter Ring	10½" × 19" (26.7 × 48.3 cm)
1	Segmentierter Ring	8½" × 14" (21.6 × 35.6 cm)
1	Biegsame Valve	2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)
1	Biegsame Valve	1½" × 6" (3.8 × 15.2 cm)
2	Kelly-Valven	1" × 2½" (2.5 × 6.4 cm)
1	Kelly-Valve	1" × 1½" (2.5 × 3.8 cm)
2	Kelly-Valven	2" × 2½" (5.1 × 6.4 cm)
3	Vaginal-Lateral-Valven	1" × 3" (2.5 × 7.6 cm)
1	Renal Wylie Valve	1" × 7" (2.5 × 17.8 cm)
1	Sterilisationsbox	Schutzbehälter

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Bookwalter Urology Retractor System ist ein tischmontiertes, selbsthaltendes Retraktorsystem, das für eine stabile, freihändige Exposition bei abdominalen und flankenseitigen Zugängen zu Nieren, Ureteren, Blase und retroperitonealen urologischen Strukturen entwickelt wurde. Das Bookwalter Urology Retractor System wird mit einem 12" (30.5 cm) Stativstab, einer Standard-Stabkupplung und einem horizontalen Flexarm mit 1" (2.5 cm) Durchmesser am Operationstisch befestigt.

Zwei segmentierte Ringe sind im Lieferumfang enthalten – 10½" × 19" (26.7 × 48.3 cm) und 8½" × 14" (21.6 × 35.6 cm) – so dass der Rahmen optimal an die Inzision und den Patienten angepasst werden kann. Acht neigbare Mehrwinkel-Ratschenmechanismen fixieren die Valven am Ring und ermöglichen eine unabhängige Einstellung von Retraktionstiefe und Valvenwinkel.

Das Instrumentarium deckt tiefe und oberflächliche Expositionen ab: biegsame Valven in 2" × 6" und 1½" × 6", Kelly-Valven in den Größen 1" × 2½", 1" × 1½" und 2" × 2½", drei 1" × 3" Vaginal-Lateral-Valven und eine 1" × 7" Wylie-Nierenvalve. Alle Komponenten sind aus unmagnetischem, chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) gefertigt und werden in einem Sterilisationsbehälter geliefert.

Das Bookwalter Urology Retractor System wird unsteril geliefert, ist wiederverwendbar, voll autoklavierbar und muss vor der Verwendung gemäß den validierten Verfahren Ihrer Einrichtung gereinigt und sterilisiert werden. Retractor Maker fertigt und liefert das Set direkt aus Sialkot, Pakistan.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest