



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Bookwalter Small Incision Ekartör Sistemi

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

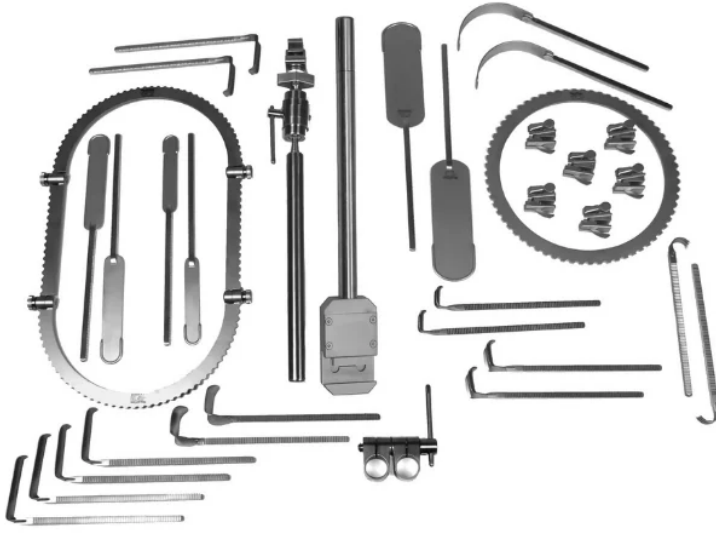

Bookwalter Small Incision Ekartör Sistemi

SKU RM-BSIRS-1

\$2,199 USD

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Saha Postu	12" (30 cm) dikey destek çubuğu
1	Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan) Post Bağlayıcı	1" x 1" (2.5 x 2.5 cm) ağır hizmet tipi ray klempi
1	Yatay Esnek Bar	1" Çap (2.5 cm) çok eklemlili kol
1	Küçük Yuvarlak Sabit Halka	8½" (21.3 cm) İç Çap (ID)
1	Küçük Oval Segmente Halka	8½" x 14" (20 x 35 cm) menteşeli, yeniden yapılandırılabilir çerçeve
6	Eğilebilir Cırcırlar	Düşük profilili mekanik çerçeve kilitleri
2	Dövülebilir (Malleable) Blade'ler	1" x 3½" (2.5 x 12.5 cm)
2	Dövülebilir (Malleable) Blade'ler	¾" x 4" (1.9 x 10 cm)
2	Dövülebilir (Malleable) Blade'ler	2" x 6" (5 x 15 cm)
2	Deaver Blade'ler	1" x 3½" (2.5 x 8.8 cm) kavisli pelvik blade'ler
2	Kelly Blade'ler	2" x 1½" (5 x 3.8 cm) sığ dik açılı blade'ler
2	Kelly Blade'ler	1" x 2½" (2.5 x 6.3 cm) dik açılı blade'ler
2	Kelly Blade'ler	1" x 3" (2.5 x 7.5 cm) dik açılı blade'ler

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
2	Derin Tırmık Blade'ler	$\frac{3}{4}$ " Derinlik $\times$ $\frac{2}{3}$ " Genişlik (1.9 $\times$ 1.7 cm) çok dişli pençeler
2	Richardson Blade'ler	$\frac{3}{4}$ " $\times$ 2" (1.9 $\times$ 5 cm) sığ düz dudaklı blade'ler
2	Richardson Blade'ler	1" $\times$ 1 $\frac{1}{4}$ " (2.5 $\times$ 3.1 cm) sığ düz dudaklı blade'ler
2	Richardson Blade'ler	$\frac{3}{4}$ " $\times$ 1" (1.9 $\times$ 2.5 cm) sığ düz dudaklı blade'ler
1	Sterilizasyon Kutusu	Özel delikli düzenleyici konteyner

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Bookwalter Small Incision Ekartör Sistemi, ameliyat masasına monte edilen, kendinden tutmalı bir ekartör sistemidir. Ameliyat masasına sabitlenerek her bir blade'i belirlenen pozisyonda tutar; hassas erişim gerektiren ve doku hasarının en aza indirilmesi hedeflenen sınırlı insizyon prosedürleri sırasında stabil, eller serbest cerrahi görüş alanı sağlar.

Montaj sistemi, 12" (30 cm) bir saha postu, 1" $\times$ 1" (2.5 $\times$ 2.5 cm) ağır hizmet tipi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan) post bağlayıcı ray klempli ve 1" (2.5 cm) çapında çok eklemlili yatay esnek bardan oluşur. İki halka seçeneği sunulmaktadır: 8 $\frac{1}{2}$ " (21.3 cm) iç çaplı küçük yuvarlak sabit halka ve insizyon etrafında yeniden yapılandırılabilmesi için menteşeli olarak tasarlanmış 8 $\frac{1}{2}$ " $\times$ 14" (20 $\times$ 35 cm) ölçülerinde küçük oval segmente halka.

Altı adet düşük profilli eğilebilir cırcır, halkaya kilitlenerek her bir blade'i gereken derinlik ve açıda sabitler. Blade seti; üç boyutta dövülebilir (malleable) blade, kavisli Deaver pelvik blade'ler, üç boyutta sığ dik açılı Kelly blade'ler, çok dişli derin tırmık (rake) blade'ler ve üç boyutta sığ düz dudaklı Richardson blade'leri içererek cerrahi görüşün küçük bir açıklıktan kademeli olarak oluşturulmasına olanak tanır.

Tüm bileşenler manyetik olmayan, cerrahi sınıf Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten üretilmiştir. Bookwalter Small Incision Ekartör Sistemi tamamen yenidir, yeniden kullanılabilir ve tam otoklavlanabilir özelliktedir; steril olmayan şekilde teslim edilir. Kullanım öncesinde sağlık kuruluşunun onaylı prosedürlerine göre temizlik ve sterilizasyon yapılmalıdır. Sistem, her bileşeni işleme ve depolama için düzenleyen özel delikli bir sterilizasyon kutusu içinde sunulur. Retractor Maker, sistemi Sialkot, Pakistan'da üretmekte ve minimum bir tam set sipariş miktarıyla doğrudan hastanelere, cerrahlara ve distribütörlere tedarik etmektedir.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest