



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Bookwalter Perineal Cerrahi Ekartör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

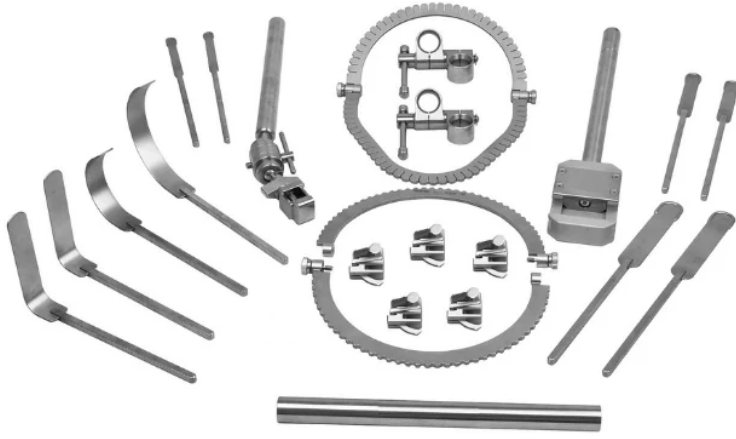

Bookwalter Perineal Cerrahi Ekartör

SKU RM-BPRS-1

\$2,199 USD

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Saha Postu	12" (30 cm)
2	Post Kuplörleri	Standart
1	Horizontal Bar	Standart
1	Dikey Uzatma Barı	12" (30 cm)
5	Eğimli Cırcır Mekanizmaları	Standart Çok Açılı
1	Yarım Daire Segmentleri	8½" Çap (21.6 cm)
1	Çentikli Perineal Halka	9½" x 14½" (24.1 x 36.8 cm)
2	Vajinal Posterior Bıçaklar	1" x 4½" (2.5 x 11.4 cm)
1	Deaver Bıçak	1" x 5" (2.5 x 12.7 cm)
1	Deaver Bıçak	1" x 3½" (2.5 x 8.9 cm)
2	Dövülebilir Bıçaklar	½" x 4" (1.3 x 10.2 cm)
2	Dövülebilir Bıçaklar	¾" x 4" (1.9 x 10.2 cm)
2	Dövülebilir Bıçaklar	1" x 5" (2.5 x 12.7 cm)
1	Sterilizasyon Kutusu	Koruyucu Kasa

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Bookwalter Perineal Cerrahi Ekartörü; perineal, kolorektal, jinekolojik ve pelvik cerrahi prosedürler sırasında stabil ve eller serbest ekarman sağlamak üzere tasarlanmış, ameliyat masasına monte edilen kendinden tutmalı bir ekartör sistemidir. Montaj iskeleti; bir adet 12" (30 cm) saha postu, iki adet post kuplörü, bir horizontal bar ve bir adet 12" (30 cm) dikey uzatma barından oluşur; bu sayede ameliyat masasına göre çoklu montaj ve konumlandırma seçenekleri sunar.

Çalışma çerçevesi, 8½" (21.6 cm) yarım daire segmenti ile desteklenen 9½" x 14½" (24.1 x 36.8 cm) boyutlarında çentikli bir perineal halka tarafından oluşturulur. Halkaya takılan beş adet çok açılı eğimli cırcır mekanizması, ekarman gereksinimi değiştikçe her bir bıçağın açısının ve derinliğinin bağımsız olarak ayarlanmasına olanak tanır.

Ürünle birlikte gelen bıçak konfigürasyonu geniş bir ekarman ihtiyacını karşılar: iki adet vajinal posterior bıçak, 5" ve 3½" uzunluklarında iki adet Deaver bıçağı ve ½" x 4", ¾" x 4" ve 1" x 5" boyutlarında altı adet dövülebilir bıçak. Tüm bileşenler manyetik olmayan cerrahi sınıf Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten üretilmiştir ve özel bir sterilizasyon kutusu içinde tedarik edilir.

Bookwalter Perineal Cerrahi Ekartörü non-steril olarak sunulur, yeniden kullanılabilir ve tamamen otoklavlanabilir özelliktedir. Bookwalter Perineal Cerrahi Ekartörü, kullanımdan önce sağlık kuruluşunun valide edilmiş prosedürlerine göre temizlenmeli ve sterilize edilmelidir. Retractor Maker, bu sistemi Sialkot, Pakistan'da üretmektedir.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest