



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Cirúrgico Perineal Bookwalter

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

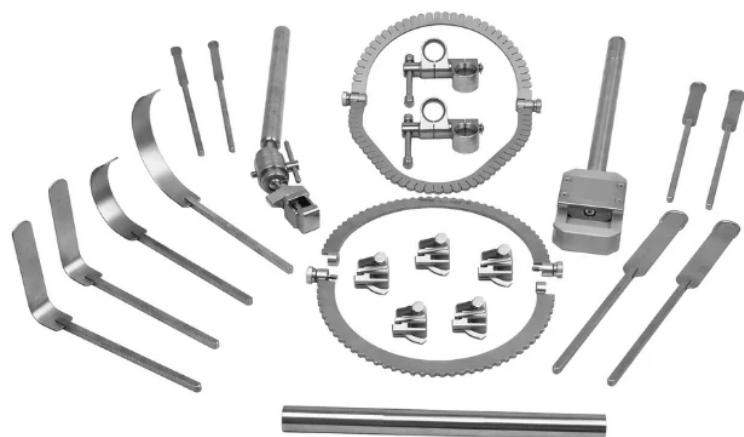

Afastador Cirúrgico Perineal Bookwalter

SKU RM-BPRS-1

\$2,199 USD

LISTA DE COMPONENTES

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
1	Poste de Campo	12" (30 cm)
2	Acopladores de Poste	Padrão
1	Barra Horizontal	Padrão
1	Barra de Extensão Vertical	12" (30 cm)
5	Mecanismos de Catraca Basculante	Multiangular Padrão
1	Segmentos de Meio Círculo	8½" de Diâmetro (21.6 cm)
1	Anel Perineal com Entalhes	9½" x 14½" (24.1 x 36.8 cm)
2	Lâminas Vaginais Posteriores	1" x 4½" (2.5 x 11.4 cm)
1	Lâmina Deaver	1" x 5" (2.5 x 12.7 cm)
1	Lâmina Deaver	1" x 3½" (2.5 x 8.9 cm)
2	Lâminas Maleáveis	½" x 4" (1.3 x 10.2 cm)
2	Lâminas Maleáveis	¾" x 4" (1.9 x 10.2 cm)
2	Lâminas Maleáveis	1" x 5" (2.5 x 12.7 cm)
1	Caixa de Esterilização	Estojo Protetor

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Cirúrgico Perineal Bookwalter é um sistema de afastamento autoestático montado na mesa, projetado para fornecer exposição estável e mãos-livres durante procedimentos cirúrgicos perineais, colorretais, ginecológicos e pélvicos. Sua estrutura de montagem consiste em um poste de campo de 12" (30 cm), dois acopladores de poste, uma barra horizontal e uma barra de extensão vertical de 12" (30 cm), oferecendo múltiplas opções de montagem e posicionamento em relação à mesa cirúrgica.

A estrutura de trabalho é formada por um anel perineal de 9½" x 14½" (24.1 x 36.8 cm) com entalhes, suportado por um segmento de meio círculo de 8½" (21.6 cm). Cinco mecanismos de catraca com inclinação multiangular fixam-se ao anel e permitem que o ângulo e a profundidade de cada lâmina sejam ajustados independentemente conforme a necessidade de exposição muda.

A configuração de lâminas incluída abrange uma gama de necessidades de exposição: duas lâminas vaginais posteriores, duas lâminas Deaver nos comprimentos 5" e 3½", e seis lâminas maleáveis nos tamanhos ½" x 4", ¾" x 4" e 1" x 5". Todos os componentes são fabricados em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) não magnético e são fornecidos em uma caixa de esterilização dedicada.

O Afastador Cirúrgico Perineal Bookwalter é fornecido não estéril, é reutilizável e totalmente autoclavável. O Afastador Cirúrgico Perineal Bookwalter deve ser limpo e esterilizado de acordo com os procedimentos validados da instituição de saúde antes do uso. A Retractor Maker fabrica o sistema em Sialkot, Paquistão.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest